

NEW USER GUIDE

CAUTION: Improper application, overstretching, or applying on areas of sensitive skin, and improper or quick removal may result in skin irritation, blisters or skin abrasion. Do not place KT TAPE® directly over cuts or open wounds. One or more of the components of this product is a dyed material. There is a possibility that some color migration may occur during use. Instructions provided are for educational use only. KT TAPE® is not a replacement for professional medical care. Warranties and remedies limited to product replacement cost.

TIPS FOR BEST RESULTS



APPLY BEFORE ACTIVITY
Apply tape one hour before beginning activity for best adhesion.



TRIM HAIR
Trim excessive hair for better adhesion.



CLEAN SKIN
Clean dirt, oils and lotions from area with rubbing alcohol.



DON'T RIP OFF!
Gently remove tape from skin




DON'T OVERSTRETCH
Overstretching tape may result in skin irritation and/or abrasions.



END ON SKIN, NOT ON TAPE
Apply directly to skin when possible, especially the ends.


STRETCHING GUIDE AND INDICATOR

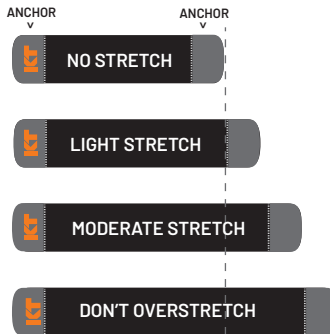

CAUTION:

- For external use only
- Avoid contact with eyes
- Do not apply to wounds or damaged skin
- Do not bandage tightly
- Keep out of reach of children
- If condition worsens, or if symptoms persist for more than 7 days or clear up and occur again within a few days, discontinue use of this product and consult a physician

2 HOW TO APPLY TAPE - END

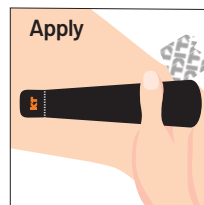


Apply as shown.

- ANCHOR first 5 cm without stretch.
- Apply stretch according to application
- ANCHOR last 5 cm without stretch.
- After applying, rub tape for best adhesion.

Apply as needed. Can be worn up to 7 days.

HOW TO APPLY TAPE - MIDDLE

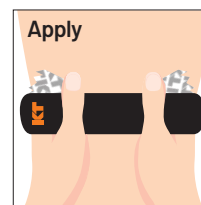


Apply as shown.


- Apply stretch according to application
- ANCHOR first 5 cm without stretch.
- ANCHOR last 5 cm without stretch.
- After applying, rub tape for best adhesion.

Read all cautions on box.

HOW TO REMOVE PAPER BACKING - MIDDLE

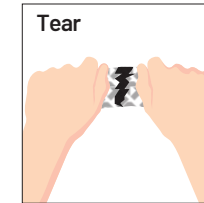


Twist and pull to tear paper in the center.

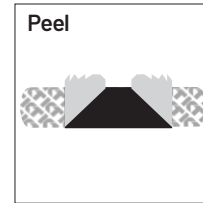

Peel paper leaving 5 cm of paper on both sides for handling.

3 HOW TO REMOVE TAPE

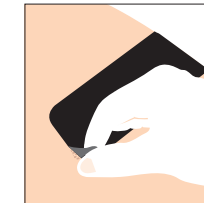

Begin by peeling tape up at a corner. Hold skin down where tape is being pulled off with one hand while gently pulling tape off with the other hand. Remove slowly.

See instructions for strong adhesive tape removal on our website

NOUVEAU GUIDE DE L'UTILISATEUR

ATTENTION : Une application incorrecte, un étirement excessif ou une application sur des zones de peau sensible, ainsi qu'un retrait incorrect ou rapide peuvent entraîner une irritation de la peau, des ampoules ou une abrasion de la peau. Ne pas positionner la bande KT TAPE® directement sur les coupures ou les plaies ouvertes. Un ou plusieurs des composants de ce produit sont des matières teintées. Il est possible qu'une certaine migration de couleur se produise pendant l'utilisation. Les instructions fournies sont uniquement à titre indicatif. KT TAPE® ne remplace pas les soins médicaux professionnels. Les garanties et les recours sont limités au coût de remplacement du produit.

CONSEILS POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS



APPLIQUER AVANT L'ACTIVITÉ
Appliquez le ruban une heure avant le début de l'activité pour une meilleure adhérence.



COUPER LES POILS
Coupez les poils superflus pour une meilleure adhérence.



NETTOYER LA PEAU
Nettoyez la saleté, les huiles et les lotions de la zone avec de l'alcool à friction.



NE PAS ARRACHER !
Retirez délicatement la bande de la peau.




NE PAS TROP ÉTIRER
Un étirement excessif de la bande peut entraîner une irritation et/ou abrasion de la peau.



FINIR SUR LA PEAU, PAS SUR LE RUBAN
Appliquez directement sur la peau lorsque cela est possible, surtout les extrémités.


GUIDE D'ÉTIREMENT ET INDICATEUR

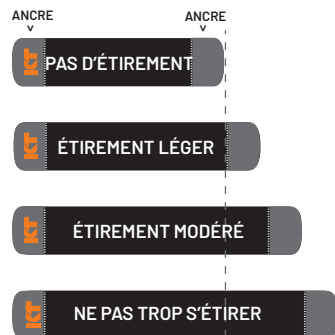

ATTENTION :

- Pour usage externe uniquement
- Éviter tout contact avec les yeux
- Ne pas appliquer sur des plaies ou sur une peau abîmée
- Ne pas faire un bandage serré
- Tenir hors de portée des enfants
- Si l'état s'aggrave ou si les symptômes persistent au-delà de 7 jours ou s'ils disparaissent et réapparaissent au bout de quelques jours, cesser d'utiliser ce produit et consulter un médecin

2 COMMENT APPLIQUER LE RUBAN ADHÉSIF - EXTRÉMITÉ

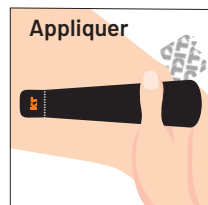


Appliquez comme on le voit sur l'illustration

- ANCRE d'abord 5 cm sans étirement.
- Appliquer l'étirement selon l'application
- ANCRE en dernier 5 cm sans étirement.
- Après l'application, frottez le ruban pour une meilleure adhérence.

Appliquer selon les besoins. Peut être portée jusqu'à 7 jours.

1 COMMENT ENLEVER LE SUPPORT PAPIER - EXTRÉMITÉ

Déchirer

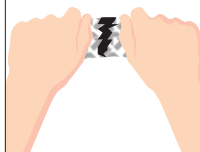


Tordre et tirer pour déchirer le papier à 5 cm de l'extrémité.

Décoller



Retirez les 5 cm de l'extrémité du papier.

COMMENT APPLIQUER LE RUBAN ADHÉSIF - MILIEU

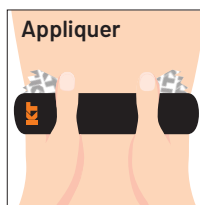

Appliquez comme on le voit sur l'illustration

- Appliquer l'étirement selon l'application
- ANCRE d'abord 5 cm sans étirement.
- ANCRE en dernier 5 cm sans étirement.
- Après l'application, frottez le ruban pour une meilleure adhérence.

Lire tous les avertissements sur la boîte.

COMMENT RETIRER LE SUPPORT PAPIER - MILIEU

Déchirer




Tordez et tirez pour déchirer le papier au centre.

Décoller



Découpez le papier en laissant 5 cm de papier sur les deux côtés pour la manipulation.

3 COMMENT RETIRER LE RUBAN

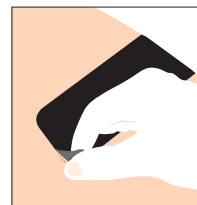

Commencez par décoller le ruban dans un coin. Maintenez la surface de la peau à l'endroit où le ruban est retiré d'une main tout en tirant doucement sur le ruban avec l'autre main. Retirez lentement.

Voir les instructions pour le retrait du ruban adhésif résistant sur notre site Web.

NEUER BENUTZERLEITFADEN

ACHTUNG: Unsachgemäßes Anbringen, Überdehnen oder Anbringen an empfindlichen Hautstellen sowie unsachgemäßes oder schnelles Entfernen können zu Hautreizungen, Blasen oder Hautabschürfungen führen. Kleben Sie KT TAPE® nicht direkt auf Schnitte oder offene Wunden. Eine oder mehrere der Komponenten dieses Produkts sind gefärbtes Material. Es besteht die Möglichkeit, dass während der Anwendung eine gewisse Abfärbung stattfindet. Die Anleitungen sind nur für den Unterricht gedacht. KT TAPE® ist kein Ersatz für eine professionelle medizinische Versorgung. Garantien und Rechtsmittel sind auf die Kosten für den Ersatz des Produkts beschränkt.


ANLEITUNG UND INDIKATOR FÜR DIE DEHNUNG



VORSICHT:


- Nur für äußere Anwendung
- Jeden Kontakt mit den Augen vermeiden
- Nicht auf Wunden oder verletzte Haut anbringen
- Nicht straff bandagieren
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- Wenn sich der Zustand verschlimmert oder die Symptome länger als 7 Tage andauern oder wenn sie verschwinden und innerhalb weniger Tage wieder auftreten, beenden Sie die Anwendung dieses Produkts und konsultieren Sie einen Arzt.

2 SO BRINGEN SIE KLEBEBAND AN - ENDEN

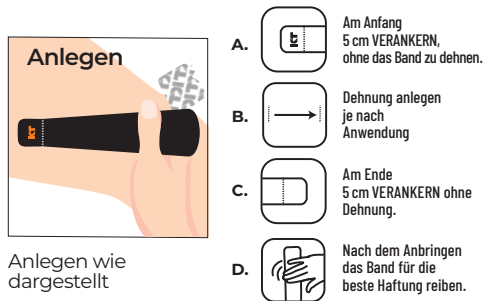


Bewerben Sie sich nach Bedarf. Kann bis zu 7 Tage getragen werden.

1 ENTFERNEN DES SCHUTZPAPIERS - ENDEN

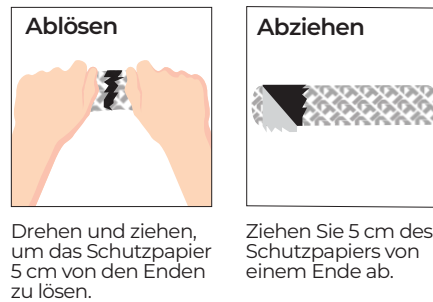


SO BRINGEN SIE KLEBEBAND AN - MITTE

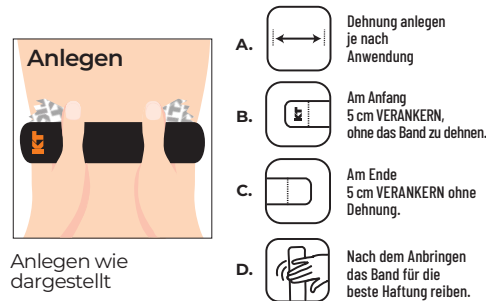

Lesen Sie alle Warnhinweise auf der Verpackung.

ENTFERNEN DES SCHUTZPAPIERS - MITTE

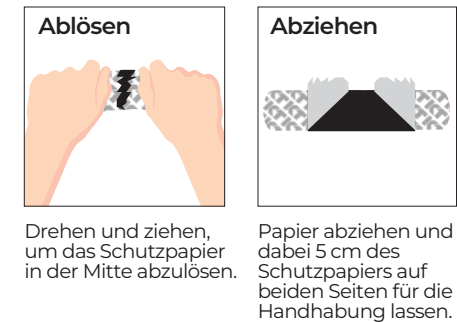

3 ENTFERNEN DES KLEBEBANDS



Siehe Anleitung zum Entfernen von starkem Klebeband auf unserer Website

TIPPS FÜR BESTE ERGEBNISSE



ANBRINGEN VOR EINER AKTIVITÄT

Kleben Sie das Band eine Stunde vor Beginn der Aktivität auf, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.



HAARE ENTFERNEN

Entfernen Sie überschüssige Haare für eine bessere Haftung.



HAUT REINIGEN

Reinigen Sie den Bereich mit Alkohol von Schmutz, Ölen und Lotionen.



NICHT ABREISSEN!

Entfernen Sie das Band vorsichtig von der Haut



NICHT ÜBERDEHNEN

Eine Überdehnung des Bandes kann zu Hautreizungen und/oder Abschürfungen führen.



AUF DER HAUT ENDEN, NICHT AUF DEM KLEBEBAND

Wenn möglich, direkt auf die Haut auftragen, besonders an den Enden.

NUOVA GUIDA UTENTE

ATTENZIONE: l'applicazione impropria, lo stiramento eccessivo o l'applicazione su aree di pelle sensibile e la rimozione impropria o rapida possono provocare irritazioni cutanee, vesciche o abrasioni della pelle. Non posizionare KT TAPE® direttamente sopra tagli o ferite aperte. Il presente prodotto è costituito da uno o più componenti di materiale tinto. Potrebbero verificarsi eventuali trasferimenti di colore durante l'utilizzo. Le istruzioni fornite sono esclusivamente per uso didattico. KT TAPE® non sostituisce le cure mediche professionali. Le garanzie e i rimedi sono limitati alle spese di sostituzione del prodotto.

SUGGERIMENTI PER I MIGLIORI RISULTATI



APPLICAZIONE PRIMA DELL'ATTIVITÀ

Applicare il nastro un'ora prima dell'inizio dell'attività per una migliore adesione.



PELI IN ECCESSO

Rasare i peli in eccesso per una migliore adesione.



PULIZIA DELLA PELLE

Rimuovere lo sporco, gli oli e le lozioni dall'area con dell'alcol denaturato.



NON STRAPPARE!

Rimuovere delicatamente il nastro adesivo dalla pelle.



NON STIRARE ECCESSIVAMENTE


Lo stiramento eccessivo del nastro può causare irritazioni e/o abrasioni cutanee.



POSIZIONARE L'ESTREMITÀ SULLA PELLE, NON SUL NASTRO

Applicare direttamente sulla pelle quando possibile, soprattutto le estremità.


GUIDA E INDICATORE DI STIRAMENTO

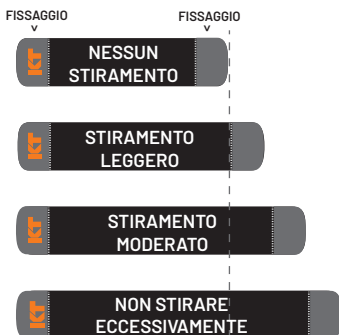

ATTENZIONE:

- Solo per uso esterno
- Evitare il contatto con gli occhi
- Non applicare su ferite o pelle danneggiata
- Non bendare in maniera troppo stretta
- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Se la condizione peggiora, o se i sintomi persistono per più di 7 giorni o si risolvono e si verificano di nuovo entro pochi giorni, sospendere l'uso di questo prodotto e consultare un medico

2 COME APPLICARE IL NASTRO - ESTREMITÀ

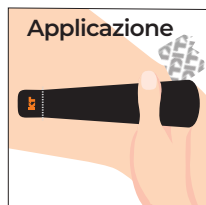


Applicare come mostrato

- FISSARE i primi 5 cm senza stirare.
- Stirare secondo l'applicazione
- FISSARE gli ultimi 5 cm senza stirare.
- Dopo l'applicazione, sfregare il nastro per una migliore adesione.

Applicare secondo necessità. Può essere indossato fino a 7 giorni.

COME APPLICARE IL NASTRO - MEDIO

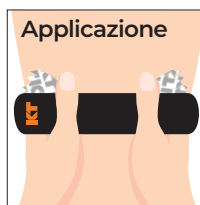


Applicare come mostrato


- Stirare secondo l'applicazione
- FISSARE i primi 5 cm senza stirare.
- FISSARE gli ultimi 5 cm senza stirare.
- Dopo l'applicazione, strofinare il nastro per una migliore adesione.

Leggere tutte le avvertenze sulla confezione.


COME RIMUOVERE IL SUPPORTO IN CARTA - CENTRO

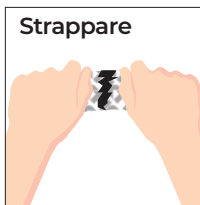

Torcere e tirare fino a strappare 5 cm di carta dall'estremità.

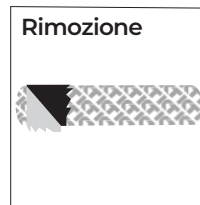

Rimuovere i 5 cm di carta dall'estremità.

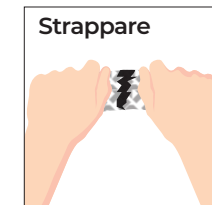


Torcere e tirare fino a strappare la carta al centro.




Rimuovere la carta lasciando 5 cm di carta su entrambi i lati per l'utilizzo.

3 COME RIMUOVERE IL NASTRO

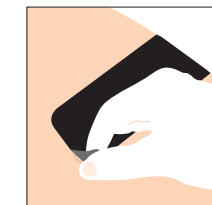

Iniziare staccando il nastro da un angolo. Tenere ferma con una mano la pelle nel punto in cui si sta staccando il nastro, mentre con l'altra tirarlo delicatamente. Rimuovere lentamente.

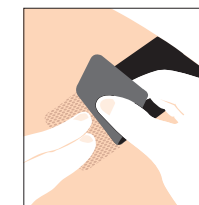

Vedere le istruzioni sul nostro sito web per la rimozione del nastro adesivo resistente

NIEUWE GEBRUIKERSHANDLEIDING

WAARSCHUWING: Onjuiste toepassing, overstrekken of aanbrengen op gevoelige delen van de huid en onjuiste of snelle verwijdering kan leiden tot huidirritatie, blaren of schaafwonden. Plaats KT TAPE® niet direct op snijwonden of open wonden. Een of meer van de componenten van dit product is een geveerd materiaal. Het is mogelijk dat tijdens het gebruik enige kleurnigratie kan optreden. De verstrekte instructies zijn alleen voor educatief gebruik. KT TAPE® is geen vervanging voor professionele medische zorg. Garanties en oplossingen zijn beperkt tot de vervangingskosten van het product.

TIPS VOOR DE BESTE RESULTATEN



AANBRENGEN VOOR ACTIVITEIT
Breng de tape een uur voor de start van een activiteit aan voor de beste hechting.



VERWIJDER HAAR
Verwijder overtollig haar voor een betere hechting.



SCHONE HUID
Verwijder vuil, olie en lotions van het gebied met ontsmettingsalcohol.



NIET ERAF TREKKEN!
Verwijder de tape voorzichtig van de huid



NIET OVERSTRETCHEN
Overstrekken van de tape kan huidirritatie en/of schaafwonden tot gevolg hebben.



UITEINDE OP DE HUID, NIET OP TAPE
Indien mogelijk direct op de huid aanbrengen, vooral de uiteinden.


STRETCHGIDS EN INDICATOR



OPGELET:

- Alleen voor uitwendig gebruik
- vermijd contact met de ogen
- Niet aanbrengen op wonden of beschadigde huid
- Niet stevig omwikkelen
- Buiten het bereik van kinderen houden
- Als de toestand verslechtert of als de symptomen langer dan 7 dagen aanhouden of na een paar dagen verdwenen te zijn opnieuw optreden, stop dan met het gebruik van dit product en raadpleeg een arts


2 HOE DE TAPE AAN TE BRENGEN - UITEINDE

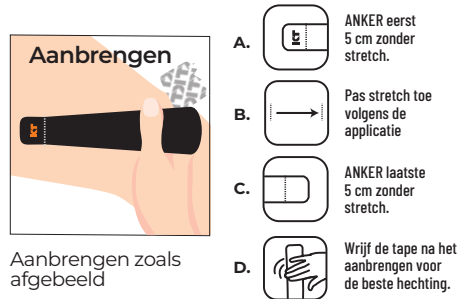


Aanbrengen zoals afgebeeld

Breng aan indien nodig. Kan tot 7 dagen gedragen worden.

1 HOE DE PAPIEREN ACHTERKANT TE VERWIJDEREN - UITEINDE

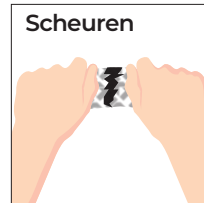


Scheuren
Draai en trek om het papier 5 cm vanaf het einde te scheuren.

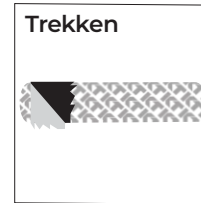

Trekken
Verwijder 5 cm van het papier vanaf het einde.


HOE DE TAPE AAN TE BRENGEN - MIDDEN

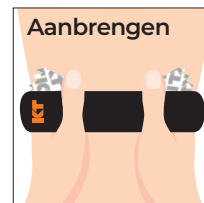


Aanbrengen zoals afgebeeld

Lees alle waarschuwingen op de doos.

HOE DE PAPIEREN ACHTERKANT TE VERWIJDEREN - MIDDEN

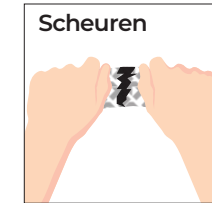


Scheuren
Draai en trek om het papier in het midden te scheuren.

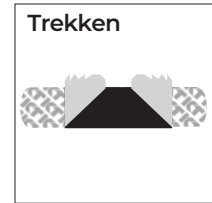

Trekken
Trek het papier en laat aan beide zijden 5 cm over voor verwerking.

3 HOE DE TAPE TE VERWIJDEREN

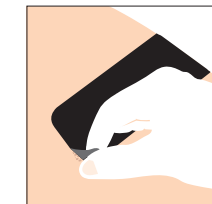

Begin in een hoek met het trekken van de tape. Houd de huid op de plaats waar de tape wordt verwijderd met één hand vast, terwijl je met de andere hand de tape voorzichtig verwijdert. Langzaam verwijderen.

Lees op onze website de instructies voor het verwijderen van sterk hechtende tape

GUIA DO NOVO USUÁRIO

CUIDADO: aplicação inadequada, esticamento excessivo ou aplicação em áreas de pele sensível e remoção inadequada ou rápida podem resultar em irritação da pele, bolhas ou abrasão da pele. Não coloque a KT TAPE® diretamente sobre cortes ou feridas abertas. Um ou mais dos componentes deste produto é um material tingido. Existe a possibilidade de que possa ocorrer alguma alteração de cores durante o uso. As instruções fornecidas são apenas para uso educacional. KT TAPE® não é um substituto para cuidados médicos profissionais. Garantias e recursos limitados ao custo de substituição do produto.

DICAS PARA MELHORES RESULTADOS



APLIQUE ANTES DA ATIVIDADE
Aplique a fita uma hora antes de começar a atividade para melhor adesão.



LIMPE A PELE
Apare o excesso de pelos para melhor aderência.



LIMPE A PELE
Limpe sujeira, óleos e loções da área com álcool.



NÃO TIRE RAPIDAMENTE!
Remova suavemente a fita da pele.



NÃO ESTIQUE DEMAIS
Esticar demais a fita pode resultar em irritação e/ou abrasão da pele.



FINALIZE NA PELE, NÃO NA FITA
Aplique diretamente na pele quando possível, especialmente as extremidades.

GUIA E INDICADOR DE ESTIRAMENTO



ATENÇÃO:

- Apenas para utilização externa
- Evitar o contacto com os olhos
- Não aplicar sobre feridas ou pele danificada
- Não fazer pensos apertados
- Manter fora do alcance das crianças
- Se o problema se agravar, ou se os sintomas persistirem durante mais de 7 dias ou desaparecerem e voltarem dentro de alguns dias, interrompa a utilização deste produto e consulte um médico.

Aplique como mostrado

Aplique conforme necessário. Pode ser utilizada por até 7 dias.

1 COMO REMOVER O SUPORTE DE PAPEL - EXTREMIDADE

Rasgue




Torça e puxe para rasgar o papel a 5 cm da extremidade.

Descole




Remova os 5 cm de papel da extremidade.

2 COMO APLICAR A FITA - EXTREMIDADE

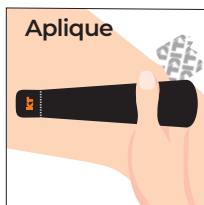

Aplique como mostrado

- FIXE primeiro 5 cm sem esticar.
- Estique de acordo com a aplicação
- FIXE por último 5 cm sem esticar.
- Após a aplicação, esfregue a fita para melhor aderência.

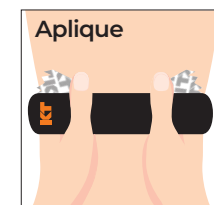


Aplique como mostrado

Leia todas as advertências na caixa.

3 COMO REMOVER O SUPORTE DE PAPEL - CENTRO

Rasgue

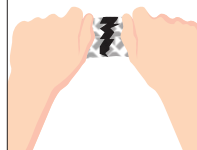

Torça e puxe para rasgar o papel no centro.

Descole



Descole o papel deixando 5 cm de papel em ambos os lados para manuseio.

3 COMO REMOVER A FITA



Comece descolando a fita pelo canto. Segure a pele onde a fita está sendo puxada com uma mão enquanto puxa suavemente a fita com a outra mão. Remova devagar.

Consulte as instruções para a remoção de fita adesiva forte em nosso site

GUÍA DE USUARIO

PRECAUCIÓN: La aplicación incorrecta, el estiramiento excesivo o la aplicación en zonas de piel sensible, así como el retiro inadecuado o rápido pueden provocar irritación de la piel, ampollas o abrasión de la piel. No coloque KT TAPE® directamente sobre cortes o heridas abiertas. Uno o más de los componentes de este producto es material tóxico. Existe la posibilidad de que se produzca alguna pérdida de color durante su uso. Las instrucciones proporcionadas son solo para uso educativo. KT TAPE® no sustituye la atención médica profesional. Las garantías y recursos se limitan al coste de sustitución del producto.

CONSEJOS PARA MEJORES RESULTADOS



APLIQUE ANTES DE LA ACTIVIDAD

Aplice la banda una hora antes de comenzar una actividad para una mejor adherencia.



RECORTE EL VELLO

Recorte el exceso de vello para una mejor adherencia.



LIMPIE LA PIEL

Limpie la suciedad, aceites y lociones de la zona con alcohol.



NO ARRANQUE

Retire suavemente la cinta de la piel.



NO ESTIRE DEMASIADO

El estiramiento excesivo de la cinta puede provocar irritación de la piel y/o abrasiones.



TERMINE EN LA PIEL, NO EN LA CINTA


Apíquelo directamente sobre la piel siempre que sea posible, especialmente los extremos.

GUÍA E INDICADOR DE ESTIRAMIENTO




PRECAUCIÓN:

- Solo para uso externo
- Evite su contacto con los ojos
- No lo aplique sobre heridas o piel dañada
- No aplique la venda de forma muy apretada
- Manténgalo fuera del alcance de los niños
- Si la afección empeora, o si los síntomas persisten durante más de 7 días o desaparecen y vuelven a aparecer a los pocos días, interrumpa el uso de este producto y consulte a un médico

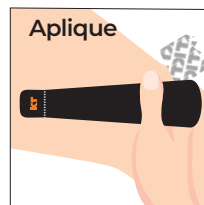

Aplice como se muestra

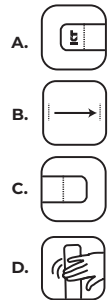

FIJE los primeros 5 cm sin estirar.



Aplice el estiramiento según aplicación




FIJE los últimos 5 cm sin estirar.




Después de aplicar, frote la banda para mejorar la adherencia.

Apply as needed. Can be worn up to 7 days.

1 CÓMO QUITAR EL PAPEL PROTECTOR - EXTREMO

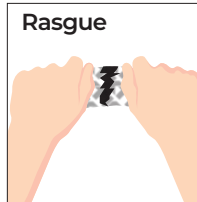


Tuerza y tire para rasgar el papel a 5 cm del extremo.

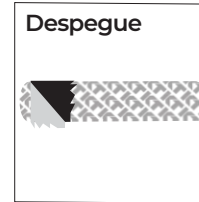

Retire los 5 cm de papel del extremo.

CÓMO APLICAR LA BANDA - CENTRO

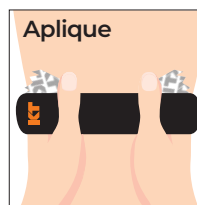


Aplice como se muestra



Aplice el estiramiento según aplicación



FIJE los primeros 5 cm sin estirar.

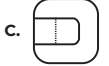


FIJE los últimos 5 cm sin estirar.




Después de aplicar, frote la banda para mejorar la adherencia.

Lea todas las precauciones de la caja.

CÓMO QUITAR EL PAPEL PROTECTOR - CENTRO

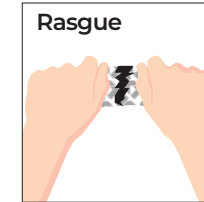


Tuerza y tire para rasgar el papel en la parte central.

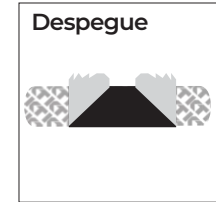

Despegue el papel dejando 5 cm de papel en ambos lados para su manipulación

3 CÓMO RETIRAR LA BANDA

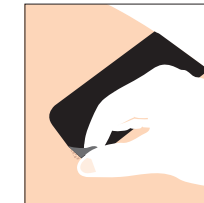

Empezar por despegar la cinta por una esquina. Sujete con una mano la piel de la zona de la que se está despegando la cinta mientras tira suavemente de ella con la otra mano. Retire lentamente

Consulte las instrucciones para retirar la banda adhesiva de alta adherencia en nuestro sitio web.

НОВО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ: Неправилното нанасяне, прекомерното разтягане или прилагането върху зони с чувствителна кожа и неправилното или бързо отстраняване може да доведе до дразнене на кожата, мекури или ожулване на кожата. Не поставяйте **KT TAPE** директно върху порязани или отворени рани. Един или повече от компонентите на този продукт са бодикасни материали. Има вероятност да възникне известна промяна на цвета по време на употреба. Предоставените инструкции са само за образователна употреба. **KT TAPE** не е заместител на професионалната медицинска помощ. Гаранциите и обещанията са ограничени до разходите за замяна на продукта.

СЪВЕТИ ЗА НАЙ-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ



ПРИЛОЖЕТЕ ПРЕДИ ДЕЙНОСТ

Поставете тейп лентата един час преди започване на дейност за най-добра адхезия.



ПОДКЪСЕТЕ ОКОСМЯВАНЕТО

Подкъсете излишното окосмяване за по-добра адхезия.



ПОЧИСТЕТЕ КОЖА

Почистете със спирт замърсяванията, маслата и лосионите от зоната.



НЕ ОТЛЕПЯЙТЕ РЯЗКО!

Внимателно отстранете лентата от кожата



НЕ ПРЕРАЗТЯГАЙТЕ

Прекомерното разтягане на тейп лентата може да доведе до кожно дразнене и/или ожулвания.



КРАЙ НА КОЖАТА, НЕ НА ЛЕНТАТА

Нанесете директно върху кожата, когато е възможно, особено краищата.


РЪКОВОДСТВО И ИНДИКАТОР ЗА РАЗТЯГАНЕ



ВНИМАНИЕ:

- Само за външна употреба
- Избягвайте контакт с очите
- Не поставяйте върху рани или кожа с нарушена цялост
- Не превързвайте стегнато
- Да се пазят от деца
- Ако състоянието се влоши или симптомите продължат повече от 7 дни или изчезнат и се появят отново в рамките на няколко дни, прекратете употребата на този продукт и се консултирайте с лекар

2 КАК ДА ПОСТАВЯТЕ ЛЕНТА - КРАЙ

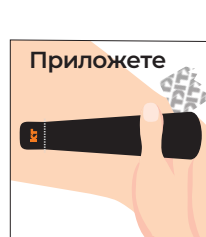

Приложете както е показано

- Първо ЗАКРЕПЕТЕ 5 cm без разтягане.
- Приложете разтягане според приложението
- ЗАКРЕПЕТЕ последно 5 cm без разтягане.
- След нанасяне втрийте лентата за най-добра адхезия.

Поставете на нужното място. Може да се износи до 7 дни.

1 КАК ДА ПРЕМАХНЕТЕ ХАРТИЕНАТА ПОДЛОЖКА - КРАЙ



Завъртете и издърпайте, за да разкъсате хартията 5 cm от края.



Отстранете 5 cm от хартията от края.

КАК ДА ПОСТАВЯТЕ ЛЕНТА - СРЕДА



Поставете както е показано.


- Приложете разтягане според приложението
- Първо ЗАКРЕПЕТЕ 5 cm без разтягане.
- ЗАКРЕПЕТЕ последно 5 cm без разтягане.
- След нанасяне втрийте лентата за най-добра адхезия.

Прочетете всички предупреждения върху кутията.

КАК ДА ПРЕМАХНЕТЕ ХАРТИЕНА ПОДЛОЖКА - СРЕДА




Завъртете и издърпайте, за да скъсате хартията в центъра.

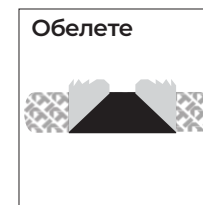


Отлепете хартията, като оставите 5 cm хартия и на двете страни за боравене.

3 КАК ДА ПРЕМАХНЕТЕ ЛЕНТАТА

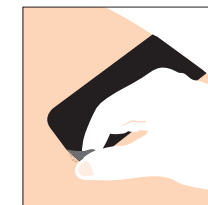

Започнете, като отлепите лентата в горния ъгъл. Дръжте кожата надолу от мястото, където тейп лентата се издърпва с една ръка, докато внимателно издърпвате тейп лентата с другата ръка. Отстранете бавно.

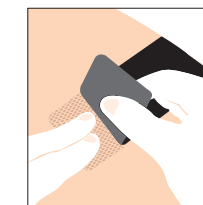

Вижте инструкциите за премахване на силно залепващата тейп лента на нашия уебсайт

UUS KASUTUSJUHE

ETTEVAATUST: ebadige paigaldamine, ülevenitamine või tundliku naha piirkondadele kandmine ning ebadige või kiire teibi eemaldamine võivad põhjustada nahärritust, villi või naha hõõrumist. Ära paigalda KT TAPE®-i otse lõike- või lahtistele haavadele. Selle toote materjali üks või mitu komponenti on värvitud. On võimalus, et kasutamise ajal võib tekkida värvide migratsioon. Juhised on mõeldud ainult informatiivseks kasutamiseks. KT TAPE® ei asenda professionaalset arstiabi. Garantiid ja hüvitused piirduvad ainult toote asendamise maksumusega.

NÕUANDED PARIMATE TULEMUSTE SAAMISEKS



PAIGALDA ENNE FÜÜSILIST KOORMUST

Paigalda teip üks tund enne treeningu alustamist, et tagada teibi parim haardumine.



RASEERI

Parema haarduvuse tagamiseks eemalda liigsed karvad.



PUHASTA NAHK

Puhasta piirkond mustusest, õlidest ja vedelikest alkoholiga hõõrudes.



ÄRA REBI MAHA!

Eemalda teip nahalt õrnalt



ÄRA VENITA ÜLE


Üle venitatud teip võib põhjustada nahaärritust ja/või marrastusi.



PAIGALA LÕPUOSA NAHALE, MITTE TEIBILE

Võimaluse korral paigalda otse nahale, eriti lõpuotsad.


VENITUSJUHE JA INDIKAATOR

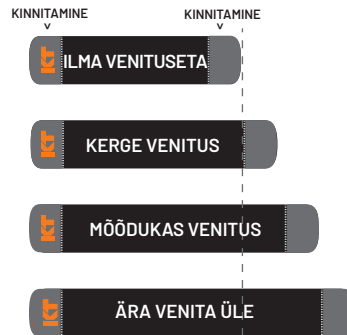

ETTEVAATUST!

- Ainult välispidiseks kasutamiseks
- Vältida silma sattumist
- Ärge paigaldage haavadele ega kahjustatud nahale
- Ärge siduge tihedalt
- Hoida lastele kättesaamatus kohas
- Kui seisund halveneb või sümptomid püsivad kauem kui 7 päeva või taanduvad ja korduvad mõne päeva jooksul uuesti, lõpetage selle toote kasutamine ja konsulteerige arstiga

2 KUIDAS PAIGALDADA TEIBI - LÕPUOSA

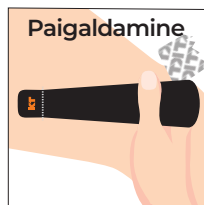


Paigalda vastavalt näidisele


- KINNITA esimesed 5 cm ilma venitamata.
- Paigalda venitades vastavalt juhendile
- KINNITA viimased 5 cm ilma venitamata.
- Pärast paigaldamist hõõru teipi parema haardumise tagamiseks.

Kanda vastavalt vajadusele. Võib kanda kuni 7 päeva.

1 KUIDAS EEMALDADA PABERIST - LÕPUOSA

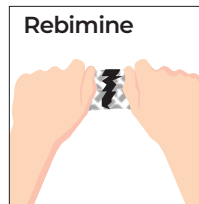


Rebimiseks keera ja tõmba paberit 5 cm lõpust.

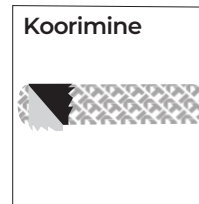

Eemalda 5 cm paberit lõpust

KUIDAS PAIGALDADA TEIPI - KESKOSA

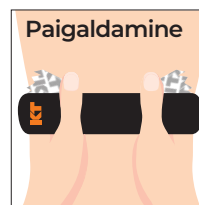


Paigalda vastavalt näidisele.


- Paigalda venitades vastavalt juhendile
- KINNITA esimesed 5 cm ilma venitamata.
- KINNITA viimased 5 cm ilma venitamata.
- Pärast paigaldamist hõõru teipi parema haardumise tagamiseks.

Loe kõiki pakendil olevaid hoiatusi.

KUIDAS EEMALDADA PABERIST - KESKOSA

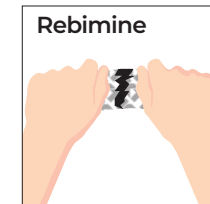


Rebimiseks keera ja tõmba paberit keskosast

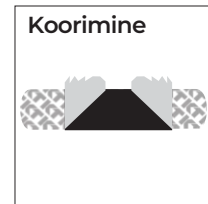


Koori paber, jättes 5 cm paberist mõlemal pool edasiseks kasutamiseks.

3 KUIDAS TEIP EEMALDADA

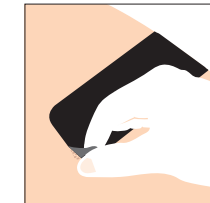

Alusta koorimist teibi ülanurgast. Hoia ühe käega nahka kinni, samal ajal teise käega teipi õrnalt maha tõmmates. Eemalda aeglaselt.

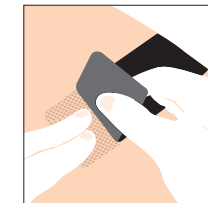

Vaata tugeva kleepuvusega teibi eemaldamise juhiseid meie veebisaidilt

VODIČ ZA NOVE KORISNIKE

OPREZ: Nepravilno nanošenje, prekomjerno rastezanje ili nanošenje na područja osjetljive kože, te nepravilno ili brzo uklanjanje može rezultirati iritacijom kože, mjehurićima ili ogrebotinama kože. Nemojte stavljati KT TAPE® izravno na posjekotine ili otvorene rane. Jedna ili više komponenti ovog proizvoda je obojeni materijal. Postoji mogućnost da tijekom uporabe dođe do promjene boje. Priložene upute su samo za edukativnu upotrebu. KT TAPE® nije zamjena za profesionalnu medicinsku njegu. Jamstva i pravni lijekovi ograničeni su na trošak zamjene proizvoda.

SAVJETI ZA NAJBOLJE REZULTATE



PRIMIENITE PRIJE AKTIVNOSTI

Primijenite traku jedan sat prije početka aktivnosti za najbolje prijanjanje.



PODREŽITE DLAKE

Odrežite višak dlačica za bolje prijanjanje.



ČISTA KOŽA

Očistite prijavštinu, ulja i losione s područja alkoholom.



NE TRGAJTE!

Nježno uklonite traku s kože



NEMOJTE PREVIŠE ISTEZATI

Pretjerano rastezanje trake može rezultirati iritacijom kože i/ili ogrebotinama.



KRAJ NA KOŽI, NE NA TRACI


Nanesite izravno na kožu kada je to moguće, posebno krajeve.

VODIČ I INDIKATOR ISTEZANJA



OPREZ:

- Samo za vanjsku uporabu
- Izbjegavajte dodir s očima
- Nemojte stavljati na rane ili oštećenu kožu
- Nemojte čvrsto zaviti
- Čuvajte izvan dohvata djece
- Ako se stanje pogorša, simptomi potraju dulje od sedam dana ili se poboljšavaju pa ponovno jave unutar nekoliko dana, prestanite s uporabom ovog proizvoda i posavjetujte se s liječnikom

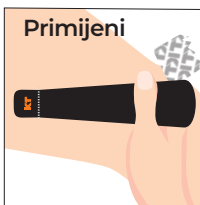


Primijenite kako je prikazano

- SIDRO prvo 5 cm bez istezanja.
- Primijenite istezanje prema primjeni.
- SIDRO zadnje 5 cm bez istezanja.
- Nakon primjene protirajte traku za bolje prijanjanje.

Primijenite po potrebi. Može se nositi do 7 dana.

1 KAKO SKINUTI PAPIRNU PODLOGU – KRAJ

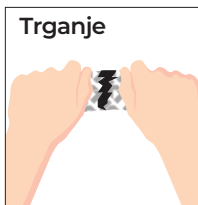


Zavrnite i povucite za trganje papira 5 cm od kraja.




Uklonite 5 cm od papira s kraja.

KAKO UKLONITI PAPIRNU PODLOGU – SREDINA

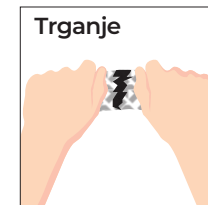


Zavrnite i povucite za trganje papira u sredini.

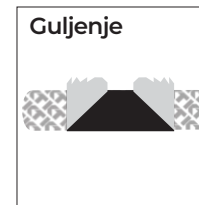

Odljepite papir ostavljajući 5 cm papira na obje strane za rukovanje.

KAKO PRIMIJENITI TRAKU – SREDINA

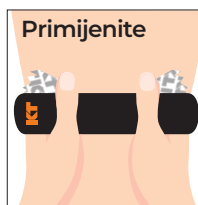


Primijenite kako je prikazano.

- Primijenite istezanje prema primjeni.
- SIDRO prvo 5 cm bez istezanja.
- SIDRO zadnje 5 cm bez istezanja.
- Nakon primjene protirajte traku za bolje prijanjanje.

Pročitajte sva upozorenja na kutiji.

3 KAKO SKINUTI TRAKU

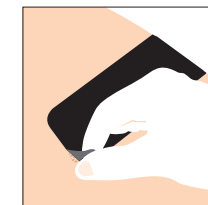

Započnite s odlepljivanjem trake prema gore u kutu. Jednom rukom držite kožu prema dolje gdje se traka skida, dok drugom rukom lagano povlačite traku. Polako uklonite.

Pogledajte upute za uklanjanje jako ljepljive trake na našoj web stranici

PŘÍRUČKA PRO NOVÉ UŽIVATELE

POZOR: Nesprávná aplikace, přílišné natahování, použití na oblasti s citlivou pokožkou a nesprávné nebo rychlé odstranění může způsobit podráždění pokožky, puchýře nebo oděrky na pokožce. Neaplikujte KT TAPE® přímo na řezné nebo otevřené rány. Jedna nebo více částí tohoto produktu je obarvený materiál. Je možné, že se při používání může část barvy přenést. Poskytnuté pokyny jsou pouze pro vzdělávací účely. KT TAPE® není náhradou profesionální lékařské péče. Závazek nebo opravné prostředky jsou omezeny na náklady na výměnu produktu.

TIPY PRO NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY



APLIKUJTE PŘED AKTIVITOU

Pásku aplikujte jednu hodinu před začátkem aktivity pro nejlepší uchycení.



ZASTŘIHNĚTE CHLOUPKY

Pro lepší uchycení zastříhněte přebytečné chloupky.



OČISTĚTE POKOŽKU

Očistěte z oblasti špinu, oleje a krémy potřením alkoholem.



NEODTRHÁVEJTE!

Pásku z pokožky odstraňujte jemně



NENATAHUJTE JI PŘÍLIŠ

Přílišné natahování pásky může způsobit podráždění pokožky a/nebo oděrky.



KONEC NA POKOŽCE, NE NA PÁSCE

Kdykoli je to možné, aplikujte ji přímo na pokožku, obzvláště konce.


PRŮVODCE NATAHOVÁNÍM A INDIKÁTOR



UPOZORNĚNÍ:

- Pouze k zevnímu použití
- Zamezte styku s očima
- Neaplikujte na zraněnou nebo poškozenou kůži
- Neobvazujte natěsno
- Uchovávejte mimo dosah dětí
- Pokud se stav zhorší nebo pokud příznaky přetrvávají déle než 7 dní nebo se zmírní a během několika dní se objeví znovu, přerušete používání tohoto produktu a poraďte se s lékařem

2 JAK PÁSKU POUŽÍT - KONEC

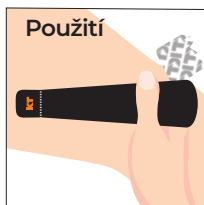

Použijte dle obrázku


- Nejprve UKOTVETE 5 cm bez natažení.
- Použijte natažení podle aplikace.
- UKOTVETE poslední 5 cm bez natažení.
- Po aplikaci pásku promněte pro nejlepší přilepení.

Aplikujte dle potřeby. Lze nosit až 7 dnů.

1 JAK ODSTRANIT PAPIROVÉ PODLOŽENÍ - KONEC




Zatočte a zatáhněte za něj 5 cm od konce, abyste ho odtrhli.

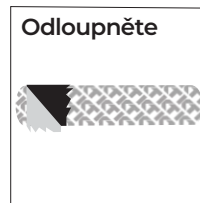

Odstraňte ony 5 cm papíru na konci.

JAK APLIKOVAT PÁSKU - STŘED

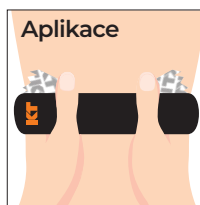


Použijte dle obrázku


- Použijte natažení podle aplikace.
- Nejprve UKOTVETE 5 cm bez natažení.
- UKOTVETE poslední 5 cm bez natažení.
- Po aplikaci pásku promněte pro nejlepší přilepení.

Přečtěte si všechna upozornění na obalu.

JAK ODSTRANIT PAPIROVÉ PODLOŽENÍ - STŘED

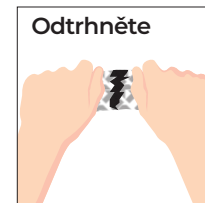


Otočte papírem a zatáhněte za něj, abyste ho odtrhli ve středu.

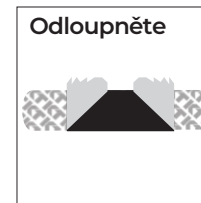


Odlopněte papír, aby na obou stranách zbyly 5 cm papíru k manipulaci.

3 JAK PÁSKU ODSTRANIT

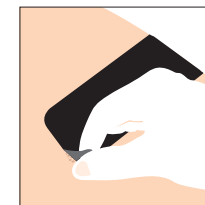

Začněte odlopnutím pásky v rohu. Tam, kde se páska odlupuje, přidržíte jednou rukou pokožku dole a přitom jemně sloupávejte pásku druhou rukou. Odstraňujte pomalu.

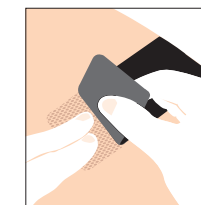

Podívejte se na pokyny k odstranění silné lepicí pásky na našich webových stránkách

NY BRUGERVEJLEDNING

FORSIGTIG: Forkert påføring, overstrækning eller påføring på områder med følsom hud og forkert eller hurtig fjernelse kan resultere i hudirritation, blærer eller hudafskrabning. Anbring ikke KT TAPE® direkte på rifter eller åbne sår. En eller flere af komponenterne i dette produkt er et farvet materiale. Der er en mulighed for, at der kan forekomme en vis farveoverførsel under brug. Instruktioner og kun til uddannelsesmæssig brug. KT TAPE® er ikke en erstatning for professionel lægehjælp. Garantier og retsmidler er begrænset til omkostninger ved køb af et nyt produkt.

TIPS TIL BEDSTE RESULTATER



PÅFØR FØR AKTIVITET

Påfør tape en time før
Du begynder aktiviteten for at få den
bedste klæbeevne.



TRIM HÅR

Trim hår for at få bedre klæbeevne.



REN HUD

Rengør snavs, olier og cremer fra
området med sprit.



LAD VÆRE MED AT RIVE AF!

Fjern forsigtigt tapen fra huden



STRÆK IKKE FOR MEGET

Overstrækning af tape kan resultere i
hudirritation og/eller hudafskrabninger.



ENDERNE PÅ HUD, IKKE PÅ TAPE

Påfør direkte på huden, når det er muligt,
især enderne.


STRÆKNINGSVEJLEDNING OG INDIKATOR




FORSIGTIG:

- Kun til eksternt brug
- Undgå kontakt med øjne
- Må ikke påføres på sår eller beskadiget hud
- Forbind ikke stramt
- Opbevares utilgængeligt for børn
- Hvis tilstanden forværres, eller hvis symptomerne varer ved i mere end 7 dage eller forsvinder og opstår igen inden for et par dage, skal du stoppe brugen af dette produkt og konsultere en læge

2 SÅDAN PÅFØRES TAPE - ENDEN

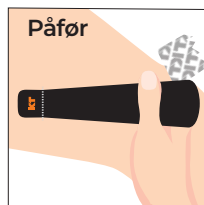


Påfør som vist

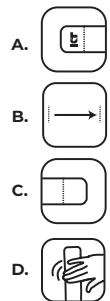


Påfør efter behov. Kan bruges i op til 7 dage.

1 SÅDAN FJERNES PAPIRUNDERLAG - ENDEN

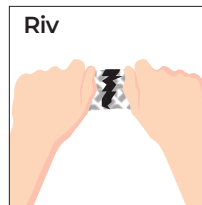


Drej og træk for at rive
papir 5 cm fra enden.

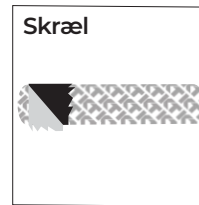


Fjern 5 cm af
papir fra enden.

SÅDAN PÅFØRES TAPE - MIDTEN

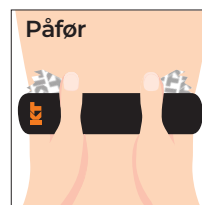


Påfør som vist.

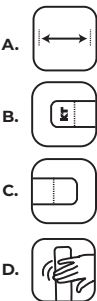


Læs alle advarsler på æsken.

SÅDAN FJERNES PAPIRUNDERLAG - MIDTEN

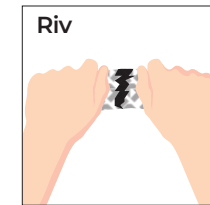


Drej og træk for at rive
papiret i midten.

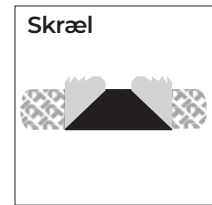


Skræl papiret og lad
5 cm papir være tilbage
på begge sider
til håndtering.

3 SÅDAN FJERNES TAPE

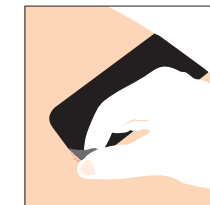

Begynd med at skrælle tapen af fra et hjørne. Hold huden nede, hvor tape trækkes af med den ene hånd, mens du forsigtigt trækker tapen af med den anden hånd. Fjern langsomt.

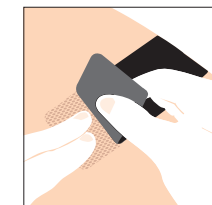

Se instruktioner til fjernelse af stærk klæbende tape på vores hjemmeside

UUSI KÄYTTÖOPAS

VAROITUS: Väärinlainen kiinnitys, liiallinen venytys tai käyttö heikolle iholle sekä epäasianmukainen tai nopea poisto voivat aiheuttaa ihoärsytystä, rakkeloja tai ihon hiertymiä. Älä aseta KT TAPE® -teippiä suoraan haavojen tai avoimien haavojen päälle. Yksi tai useampi tämän tuotteen komponenteista on värjätty materiaalia. Käytön aikana saattaa esiintyä värin siirtymistä. Ohjeet on tarkoitettu vain opetuskäyttöön. KT TAPE® ei korvaa ammattilaisista sairaanhoitoa. Takuu ja oikeussuojakeinot rajoittuvat tuotteen vaihtokustannuksiin.

VINKKEJÄ PARHAIHIN TULOKSIIN



KIINNITÄ ENNEN TOIMINTAA
Kiinnitä teippi tuntia ennen toiminnan aloittamista, jotta teippi tarttuu parhaiten.



TRIMMAA KARVAT
Trimmaa ylimääräiset karvat paremman tarttuvuuden varmistamiseksi.



PUHDAS IHO
Puhdista lika, öljyt ja voiteet alueelta puhdistusaineella.



ÄLÄ REPÄISE IRTI!
Irrota teippi varovasti iholta.




ÄLÄ VENYTÄ LIIKAA
Teipin ylivenyminen voi aiheuttaa ihoärsytystä ja/tai hiertymiä.




PÄÄTÄ IHOILLE, EI TEIPILLE
Lisää suoraan iholle mahdollisuuksien mukaan, erityisesti päät.


VENYTYSOPAS JA MITTA

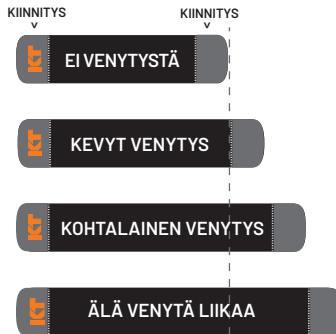


1 TAUSTAPAPERIN POISTAMINEN - PÄÄTY

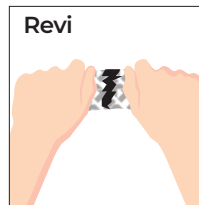


Revi
Kierrä ja vedä repiäksesi paperia 5 cm päädyistä.

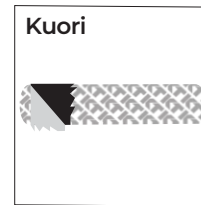

Kuori
Poista paperia 5 cm päädyistä.

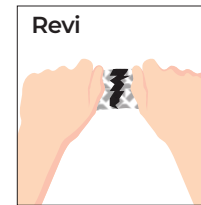


Revi
Kierrä ja vedä repiäksesi paperin keskeltä.

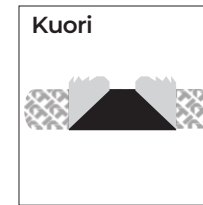

Kuori
Kuori paperi jättäen molemmille puolille 5 cm paperia käsittelyä varten.

2 TEIPIN KIINNITTÄMINEN - PÄÄTY

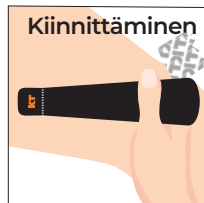

Kiinnitä kuvan mukaisesti

- Kiinnitä ensimmäiset 5 cm ilman venytystä.
- Venytä käytön mukaan.
- Kiinnitä viimeiset 5 cm ilman venytystä.
- Hiero teippiä kiinnittämisen jälkeen, jotta se tarttuu kunnolla kiinni.

Levitä tarpeen mukaan. Voidaan käyttää jopa 7 päivää.

TEIPIN KIINNITTÄMINEN - KESKIKOHTA




Kiinnitä kuvan mukaisesti

- Venytä käytön mukaan.
- Kiinnitä ensimmäiset 5 cm ilman venytystä.
- Kiinnitä viimeiset 5 cm ilman venytystä.
- Hiero teippiä kiinnittämisen jälkeen, jotta se tarttuu kunnolla kiinni.

Lue kaikki laatikon varoitukset.

3 TEIPIN IRROTTAMINEN

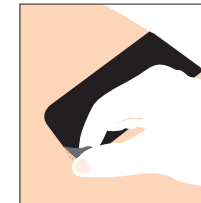

Aloita irrottamalla teippi ylös kulmasta. Pidä toisella kädellä ihoa alhaalla teipin irrotuskohdasta ja vedä teippiä varovasti irti toisella kädellä. Irrota hitaasti.



Katso ohjeet vahvan teipin irrottamiseen verkkosivuiltamme

HUOMIO:

- Vain ulkoiseen käyttöön
- Vältä kosketusta silmiin
- Älä käytä haavoille tai vaurioituneelle iholle
- Älä sido tiukasti
- Pidä poissa lasten ulottuvilta
- Jos tila pahenee tai jos oireet jatkuvat yli 7 päivää tai häviävät ja ilmaantuvat uudelleen muutaman päivän kuluessa, lopeta tämän tuotteen käyttö ja ota yhteys lääkäriin

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ακατάλληλη εφαρμογή, το υπερβολικό τέντωμα ή η εφαρμογή σε περιοχές με ευαίσθητο δέρμα καθώς και η ακατάλληλη ή κακή φροντίδα μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό του δέρματος, φουσκάλες ή δερματικές εκδορές. Μην τοποθετείτε το KT TAPE® απευθείας πάνω σε κοψίματα ή ανοιχτές πληγές. Ένα ή περισσότερα από τα υλικά αυτού του προϊόντος είναι βαμμένα. Υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί κάποιο αποτύπωμα χρώματος κατά τη διάρκεια της χρήσης. Οι οδηγίες που παρέχονται είναι μόνο για εκπαιδευτική χρήση. Το KT TAPE® δεν αντικαθιστά την ιατρική φροντίδα από επαγγελματίες. Οι εγγυήσεις και αποζημιώσεις περιορίζονται στο κόστος αντικατάστασης του προϊόντος.

ΟΔΗΓΟΣ ΤΕΝΤΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μόνο για εξωτερική χρήση.
- Να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια.
- Μην εφαρμόζετε σε τραύματα ή κατεστραμμένο δέρμα.
- Μην το δένετε σφιχτά.
- Κρατήστε το μακριά από παιδιά.
- Εάν χειροτερέψι η κατάστασή σας ή τα συμπτώματα επιμένουν για περισσότερες από 7 ημέρες ή υποχωρήσουν κι εμφανιστούν ξανά μέσα σε λίγες μέρες, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος και συμβουλευτείτε τον γιατρό.

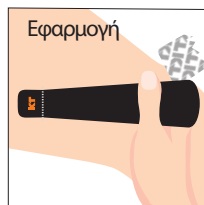

Εφαρμόστε όπως απεικονίζεται

- Α. Πρώτα η ΑΓΚΥΡΑ 5 cm χωρίς τέντωμα.
- Β. Τεντώστε ανάλογα με την εφαρμογή.
- Γ. ΑΓΚΥΡΑ τελευταία 5 cm χωρίς τέντωμα.
- Δ. Μετά την εφαρμογή, τρίψτε την ταινία για καλύτερη επικόλληση.

Εφαρμόστε όπως απαιτείται. Μπορεί να φορεθεί έως και 7 ημέρες.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Εφαρμόστε την ταινία μία ώρα πριν αρχίσετε τη δραστηριότητα για καλύτερη επικόλληση.



ΚΟΥΡΕΨΤΕ ΤΙΣ ΤΡΙΧΕΣ

Κουρέψτε τις υπερβολικές τρίχες για καλύτερη επικόλληση.



ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ

Καθαρίστε τη βρομιά, τα έλαια και τις λοσιόν από την περιοχή με αλκοολούχο υγρό.



ΜΗΝ ΤΟ ΣΚΙΖΕΤΕ!

Αφαιρέστε απαλά την ταινία από το δέρμα.



ΜΗΝ ΤΕΝΤΩΝΕΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ


Το υπερβολικό τέντωμα της ταινίας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον ερεθισμό του δέρματος και/ή εκδορές.




ΤΑ ΑΚΡΑ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ

Εφαρμόστε απευθείας στο δέρμα όταν είναι δυνατό, ειδικά τα άκρα.

1 ΠΩΣ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΩ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΧΑΡΤΙΟΥ – ΑΚΡΗ

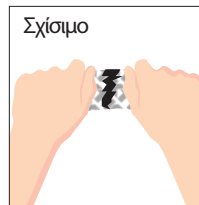


Στρίψτε και τραβήξτε για να σκιστεί το χαρτί 5 cm από την άκρη.

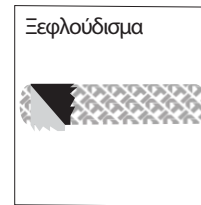


Αφαιρέστε 5 cm χαρτί από την άκρη.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΩ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΧΑΡΤΙΟΥ – ΜΕΣΗ

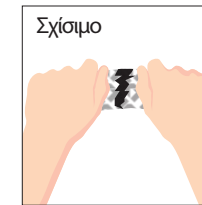

Στρίψτε και τραβήξτε για να σκιστεί το χαρτί στο κέντρο.

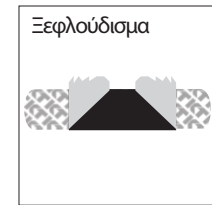

Ξεφλούδιστε το χαρτί αφήνοντας 5 cm και στα δύο άκρα για χειρισμό.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΤΕ ΤΑΙΝΙΑ - ΜΕΣΗ





Εφαρμόστε όπως απεικονίζεται

- Α. Τεντώστε ανάλογα με την εφαρμογή.
- Β. Πρώτα η ΑΓΚΥΡΑ 5 cm χωρίς τέντωμα.
- Γ. ΑΓΚΥΡΑ τελευταία 5 cm χωρίς τέντωμα.
- Δ. Μετά την εφαρμογή, τρίψτε την ταινία για καλύτερη επικόλληση.

Διαβάστε όλες τις προφυλάξεις στο κουτί.

3 ΠΩΣ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ

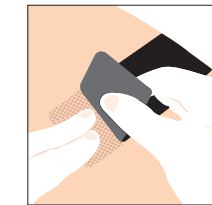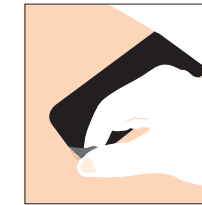

Ξεκινήστε ξεκολλώντας την ταινία από μια γωνία. Κρατήστε το δέρμα κάτω από το σημείο που αφαιρείται η ταινία με το ένα χέρι, ενώ με το άλλο χέρι τραβάτε απαλά την ταινία. Αφαιρέστε αργά.

Δείτε οδηγίες για την αφαίρεση της ισχυρής κολλητικής ταινίας στην ιστοσελίδα μας.

ÚJ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

VIGYÁZAT: A helytelen alkalmazás, túlfeszítés vagy érzékeny bőrfelületekre történő felhordás, valamint a helytelen vagy gyors eltávolítás bőrirritációt, hólyagokat vagy bőrkopást okozhat. Ne helyezze a KT TAPE-t közvetlenül vágásokra vagy nyílt sebekre. Ennek a terméknek egy vagy több összetevője festett anyag. Előfordulhat, hogy használat közben némi színvándorlás lép fel. A mellékelt utasítások kizárólag oktatási célokat szolgálnak. A KT TAPE nem helyettesíti a professzionális orvosi ellátást. A jótállás és jogorvoslat a termék csereköltiségeire korlátozódik.

TIPPEK A LEGJOBB EREDMÉNYHEZ



HELYEZZE FEL A TEVÉKENYSÉG ELŐTT
Ragassza fel a szalagot a kezdeti tevékenységhez képest egy órával korábban a legjobb tapadás érdekében.



HAJ VÁGÁSA
Vágja le a hosszú szőrásokat a jobb tapadás érdekében.



TISZTA BŐR
Tisztítsa meg a szennyeződéseket, testzsírokat és testpolókat a területől alkohollal.



NE TÉPJ KI!
Óvatosan távolítsa el a szalagot a bőrről.




NE NYÚLJON TÚL
A szalag túlnyúlása eredményezhet bőrirritációt és/vagy horzsolást.



A VÉGE A BŐRÖN, NEM A SZALAGON
Vigye fel közvetlenül a bőrre, ha lehetséges, főleg a végeit.

NYÚJTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS KIJELZŐ

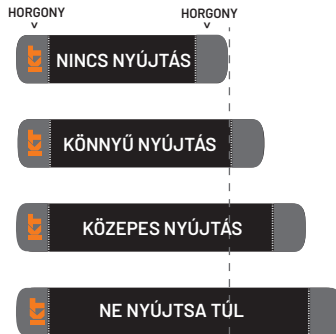


VIGYÁZAT:

- Kizárólag külső használatra
- Szembe ne kerüljön
- Ne használja sebekben vagy sérült bőrön
- Ne húzza szorosra
- Gyerekek elől elzárva tartandó
- Ha az állapota rosszabbodik, vagy ha a tünetek 7 napnál hosszabb ideig fennállnak, illetve ha néhány napon belül megszűnnek, de aztán újra jelentkeznek, hagyja abba a termék alkalmazását, és forduljon orvoshoz

2 SZALAG FELHASZNÁLÁSA - VÉGE




Alkalmazza a képen látható módon

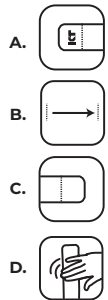

Használja szükség szerint. Akár 7 napig viselhető.

1 A PAPÍRHÁT ELTÁVOLÍTÁSA - VÉGE

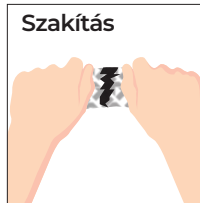


Szakítás
Csavarja és húzza szakadásig A papírt 5 cm-re a végétől.




Lehúzás
Távolítsa el az 5 cm-t A papír végétől.

A PAPÍR HÁTULSÓ RÉSZ ELTÁVOLÍTÁSA - KÖZÉP

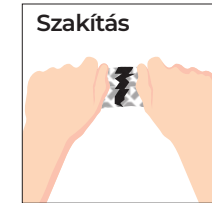

Szakítás
Csavarja és húzza szakadásig a papírt középre.

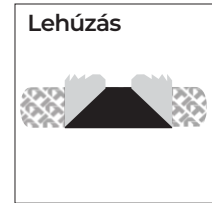


Lehúzás
Húzza le a papírt, hagyjon 5 cm-nyi papírt mindkettő oldalán a kezeléshez.

SZALAG FELHASZNÁLÁSA - KÖZÉP




Alkalmazza a képen látható módon

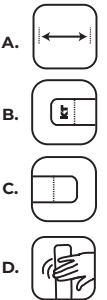


Olvasson el minden figyelmeztetést a dobozon.

3 HOGYAN KELL ELTÁVOLÍTNI A SZALAGOT

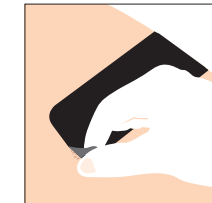

Kezdje azzal, hogy egy sarokban húzza le a ragasztószalagot. Egyik kezével tartsa lenyomva a bőrt ott, ahol a szalagot lehúzza, míg a másik kezével óvatosan húzza le a szalagot. Lassan távolítsa el.

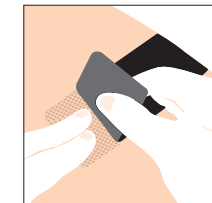

Tekintse meg weboldalunkon az erős ragasztószalag eltávolítására vonatkozó utasításokat

JAUNA LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

UZMANĪBU: Nepareiza uzklāšana, pārmērīga izstiepšana vai uzklāšana uz jutīgas ādas vietām, kā arī nepareiza vai ātra noņemšana var izraisīt ādas kairinājumu, tūznes vai ādas nobrāzumus. Nenovietojiet KT TAPE® tieši virs griezumiem vai vaļējām brūcēm. Viena vai vairākas šī produkta sastāvdaļas ir krāsots materiāls. Pastāv iespēja, ka lietošanas laikā var rasties neliela krāsu migrācija. Sniegtās instrukcijas ir paredzētas tikai izglītošanai lietošanai. KT TAPE® neaizstāj profesionālu medicīnisko aprūpi. Garantijas un tiesiskās aizsardzības līdzekļi attiecas tikai uz produkta nomaines izmaksām.

PADOMI LABĀKO REZULTĀTU GANAI



UZKLĀT PIRMS DARBĪBAS

Uzklājiet lenti stundu pirms darbības sākšanas, lai nodrošinātu vislabāko saķeri.



APGRIEZIET MATIŅUS

Apgrieziet liekos matiņus labākai saķerei.



TĪRA ĀDA

Notīriet netīrumus, eļļas un losjonus no zonas ar spirtu.



NEIZRAUJIET!

Uzmanīgi noņemiet lenti no ādas



NEPĀRSTIEPIET


Lentes pārstiepšana var izraisīt ādas kairinājumu un/vai nobrāzumus.



BEIGAS UZ ĀDAS, NEVIS UZ LENTES

Uzklāt tieši uz ādas, kad iespējams īpaši uz galiem.


IZSTIEPŠANĀS CEĻVEDIS UN INDIKATORS

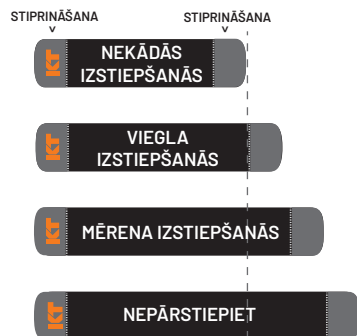

UZMANĪBU!

- Tikai ārējai lietošanai
- Izvairieties no iekļūšanas acīs
- Nelieciet uz brūcēm vai bojātas ādas
- Neuzlieciet pārsēju pārāk cieši
- Glabājiet bērniem nepieejamā vietā
- Ja stāvoklis pasliktinās vai simptomi saglabājas vairāk nekā 7 dienas vai nozūd un pēc pāris dienām atkal atkārtojas, pārtrauciet šī izstrādājuma lietošanu un konsultējieties ar ārstu

2 KĀ UZLIKT LENTI - BEIGAS

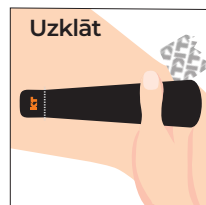


Uzklāt, kā parādīts


- Nostipriniet vispirms 5 cm bez stiepšanas.
- Uzklājiet izstiepēju saskaņā ar uzklāšanu.
- Nostipriniet pēdējās 5 cm bez stiepšanas.
- Pēc uzklāšanas paberzējiet lenti vislabākai saķerei.

Uzlieciet pēc vajadzības. Var nēsāt līdz 7 dienām.

1 KĀ NOŅEMT PAPIĀRA ODERI - BEIGAS

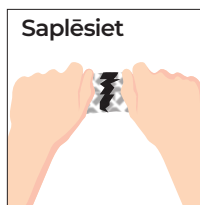


Saplēsiet
Pagrieziet un velciet, lai saplētu papīru 5 cm no gala.

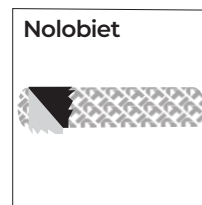

Nolobiet
Noņem 5 cm papīra no gala.

KĀ UZLIKT LENTI - VIDUS

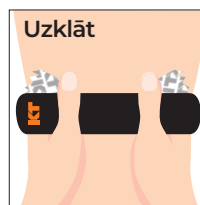


Uzklāt, kā parādīts


- Uzklājiet izstiepēju saskaņā ar uzklāšanu.
- Nostipriniet vispirms 5 cm bez stiepšanas.
- Nostipriniet pēdējās 5 cm bez stiepšanas.
- Pēc uzklāšanas paberzējiet lenti vislabākai saķerei.

Pēc uzklāšanas paberzējiet lenti, lai nodrošinātu vislabāko saķeri.

KĀ NOŅEMT PAPIĀRA ODERI - VIDUS

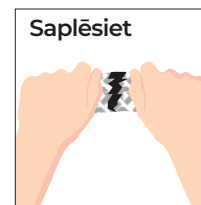


Saplēsiet
Pagrieziet un velciet, lai saplētu papīru centrā.

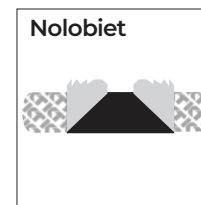


Nolobiet
Nolobiet papīru atstājot 5 cm papīra uz abām malām apstrādei.

3 KĀ NOŅEMT LENTI

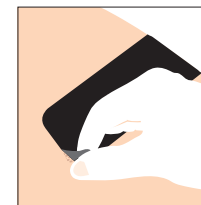

Sāciet ar lentes nolobīšanu stūri. Ar vienu roku turiet ādu vietā, kur tiek noņemta lente, bet ar otru roku uzmanīgi nolieciet lenti. Lēnām noņemiet.

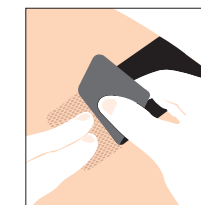

Skatiet norādījumus par stipras līmēšanas noņemšanu mūsu vietnē

NAUJAS VARTOTOJO VADOVAS

ĮSPĖJIMAS: netinkamai uždėjus, per daug ištempus arba uždėjus ant jautrios odos, taip pat netinkamai ar greitai nuėmus, gali sudirgti oda, atsirasti pūslių ar odos įbrėžimų. Nedėkite KT TAPE™ tiesiai ant įpjovimų ar atvirų žaizdų. Viena ar daugiau šio gaminio sudedamųjų dalių yra dažyta medžiaga. Yra tikimybė, kad naudojimo metu gali įvykti tam tikra spalvų migracija. Pateiktos instrukcijos skirtos tik mokomajam naudojimui. KT TAPE™ nepakeičia profesionalios medicininės priežiūros. Garantijos ir teisų gynimo priemonės apsiriboja gaminio pakaitimo išlaidomis.

GERIAUSIŲ REZULTATŲ PATARIMAI



TAIKYTI PRIEŠ VEIKLĄ
Užklijuokite juostą likus valandai iki veiklos pradžios, kad būtų geriausiai priklijuota.



APKIRPTI PLAUKUS
Apkirpkite perteklinius plaukus, kad geriau sukibtų.



ŠVARI ODA
Išvalykite nešvarumus, aliejus ir losjonus alkoholiu.



NEGALIMA ATSIPRAŠYTI!
Švelniai nuimkite juostą nuo odos




NEPERSITEMPKITE
Dėl per didelio juostos ištempimo gali odos sudirginimas ir (arba) įbrėžimai.




PABAIGA ANT ODOS, O NE ANT JUOSTOS
Jei įmanoma, tepkite tiesiai ant odos, ypač galus.

TEMPIMO VADOVAS IR INDIKATORIUS

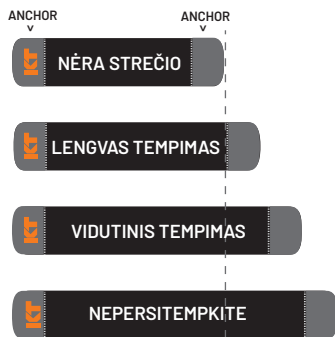

2 KAIP KLIJUOTI JUOSTĄ - PABAIGA

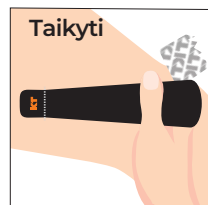


Taikyti, kaip parodyta


- INKARAS** pirmiausia 5 cm be ištempimo.
- Taikyti tempimą pagal taikymą.
- ANCHOR** paskutinis 5 cm be ištempimo.
- Užteptę patrinkite juosta geriausias sukibimas.

Taikykite pagal poreikį. Galima naudoti iki 7 dienų.

1 KAIP PAŠALINTI POPIERIAUS PAGRINDĄ - PABAIGA

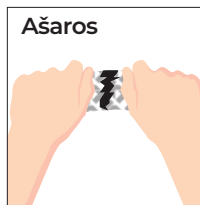


Sukite ir traukite, kad suplėšytumėte popierius 5 cm nuo galo.

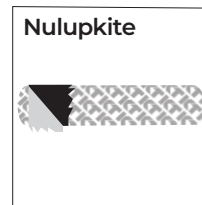

Pašalinkite 5 cm popieriaus nuo galo.

KAIP KLIJUOTI JUOSTĄ - VIDURYS

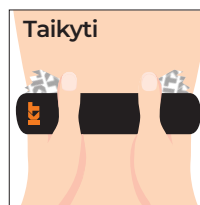


Taikyti, kaip parodyta


- Taikyti tempimą pagal taikymą.
- INKARAS** pirmiausia 5 cm be ištempimo.
- ANCHOR** paskutinis 5 cm be ištempimo.
- Užteptę patrinkite juosta geriausias sukibimas.

Perskaitykite visus įspėjimus ant dėžutės.

KAIP PAŠALINTI POPIERINĮ PAGRINDĄ - VIDURYS

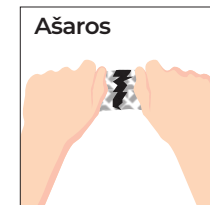


Sukite ir traukite, kad suplėšytumėte popieriaus viduryje.

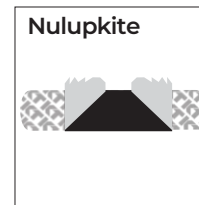

iš Nulupto popieriaus paliekant 5 cm popieriaus ant abiejų pusių, kad būtų galima tvarkyti

3 KAIP NUIMTI JUOSTĄ

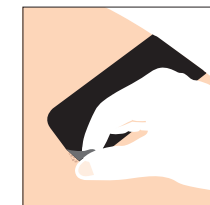

Pradėkite nuo juostos nulupimo ties kampu. Viena ranka prilaikykite odą toje vietoje, kur plėsiama juosta, o kita ranka švelniai nuimkite juostą. Nuimkite lėtai.

Žr. stiprios lipnios juostos nuėmimo instrukcijas mūsų svetainėje

DĖMESIO:

- Tik išoriniam naudojimui
- Saugokitės, kad nepatektų į akis
- Nenaudokite ant žaizdų ar pažeistos odos
- Neteipinkite per standžiai
- Saugokite nuo vaikų
- Pablogėjus būklei arba jei simptomai trunka ilgiau nei 7 dienas arba jei pradingsta ir vėl atsinaujina po kelių dienų, produkto nebenaudokite ir kreipkitės į gydytoją

PRZEWODNIK DLA NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

PRZESTROGA: Nieodpowiednie nakładanie, nadmierne rozciąganie bądź nakładanie produktu na wrażliwe obszary skóry, a także niewłaściwe lub szybkie zdejmowanie może powodować podrażnienia skóry, pecherze lub otarcia. Nie wolno nakładać produktu KT TAPE® bezpośrednio na zacięcia i otwarte rany. Jeden lub więcej składników produktu to farbowany materiał. Istnieje ryzyko zafarbowania w trakcie użytkowania produktu. Załączone instrukcje służą jedynie do celów edukacyjnych. Taśma KT TAPE® nie zastępuje profesjonalnej opieki medycznej. Gwarancje i środki ochrony prawnej ograniczone są do kosztu wymiany produktu.


PRZEWODNIK PO ROZCIĄGANIU I WSKAŹNIK



PRZESTROGA:

- Tylko do użytku zewnętrznego
- Należy unikać kontaktu z oczami
- Nie stosować na rany lub uszkodzoną skórę
- Nie bandażować ciasno
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
- Jeśli stan się pogorszy lub jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 7 dni lub ustępują w ciągu kilku dni, przerwij stosowanie tego produktu i skonsultuj się z lekarzem

2 JAK NAŁOŻYĆ TAŚMĘ - ZAKOŃCZENIE

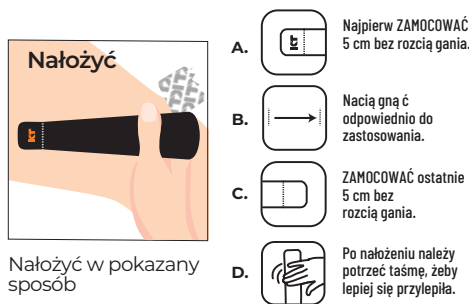

Zastosuj w razie potrzeby. Można nosić do 7 dni.

WSKAZÓWKI DLA NAJLEPSZYCH WYNIKÓW



NAŁOŻYĆ PRZED AKTYWNOŚCIĄ

Nałożyć taśmę godzinę przed rozpoczęciem działania, żeby najlepiej się przykleiła.



PRZYCIĄĆ WŁOSY

Dla lepszego przyklejenia wcześniej przyciąć nadmierne owłosienie.



WYCZYŚCIĆ SKÓRĘ

Oczyszczyć dany obszar skóry z zabrudzeń, tłuszczu i balsamów, wcierając alkohol do nacierania.



NIE ZDIERAĆ!

Delikatnie zdjąć taśmę ze skóry



NIE ROZCIĄGAĆ ZA MOCNO

Nadmierne rozciągnięcie taśmy może spowodować podrażnienie skóry i/lub otarcia.



ZAKOŃCZENIE NA SKÓRZE, NIE NA TAŚMIE

W miarę możliwości nakładać na skórę, zwłaszcza zakończenia.

1 JAK ZDJĄĆ PAPIEROWĄ PODLEPKĘ - ZAKOŃCZENIE




Przekrocić i pociągnąć, żeby odebrać papier 5 cm od krańca.




Zdjąć 5 cm papier od krańca.

JAK ZDJĄĆ PAPIEROWĄ PODLEPKĘ - ŚRODEK

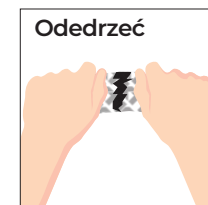


Przekrocić i pociągnąć, żeby odebrać papier pośrodku.

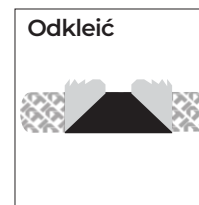

Odkleić papier, pozostawiając 5 cm papieru po obu stronach do trzymania.


JAK NAŁOŻYĆ TAŚMĘ - ŚRODEK

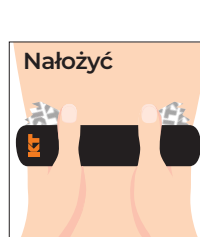

Nałożyć w pokazany sposób

Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia na pudełku.

3 JAK ZDJĄĆ TAŚMĘ

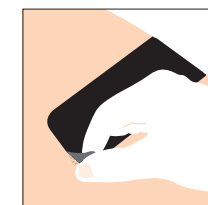

Najpierw należy odkleić ją na rogu. Jedną dłonią należy przytrzymać skórę w miejscu, w którym odklejamy taśmę, a drugą dłonią delikatnie odklejać produkt. Taśmę należy zdejmować powoli.

Z instrukcją zdejmowania mocno przylepnej taśmy można się zapoznać w naszej witrynie internetowej.

NOUL GHID DE UTILIZATOR

AVERTISMENT: Aplicarea necorespunzătoare, întinderea excesivă sau aplicarea pe zone de piele sensibilă și îndepărtarea necorespunzătoare sau rapidă pot duce la iritarea pielii, apariția de bătăi sau abraziuni ale pielii. Nu aplicați banda KT TAPE® direct peste tăieturi sau răni deschise. Una sau mai multe dintre componentele acestui produs este un material vopsit. Există posibilitatea ca o anumită migrație a culorii să apară în timpul utilizării. Instrucțiunile furnizate sunt doar pentru uz educațional. KT TAPE® nu înlocuiește îngrijirea medicală profesională. Garanțiile și căile de atac sunt limitate la costul de înlocuire a produsului.

SFATURI PENTRU CELE MAI BUNE REZULTATE



APLICAȚI ÎNAINTE DE ACTIVITATE
Aplicați banda cu o oră înainte
începerea activității pentru cea mai bună aderență.



TĂIAȚI PĂRUL
Tăiați părul în exces pentru o mai bună aderență.



CURĂȚAȚI PIELEA
Curățați murdăria, uleiurile și loțiunile de pe
zonă cu alcool de frecat.



NU SMULGEȚI!
Îndepărtați ușor banda de pe piele




NU ÎNTINDEȚI PEA MULȚ
Întinderea excesivă a benzii poate duce la
iritarea pielii și/sau abraziuni.



**CAPĂȚUL SĂ FIE PE PIELE,
NU PE BANDĂ**
Aplicați direct pe piele atunci când este posibil,
în special capetele.


GHID ȘI INDICATOR DE STRETCHING (ÎNTINDERE)

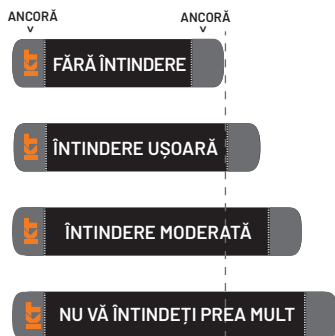

ATENȚIE:

- Doar pentru uz extern
- Evitați contactul cu ochii
- Nu aplicați pe răni sau pe pielea rănită
- Nu aplicați bandajul puternic strâns
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor
- Dacă starea se înrăutățește, sau dacă simptomele persistă mai mult de 7 zile, sau dacă dispar și reapar după câteva zile, întrerupeți utilizarea acestui produs și consultați un medic

2 MODUL DE APLICARE A BENZII - CAPĂȚ

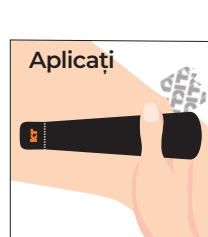


Aplicați așa cum se arată

- ANCORAȚI mai întâi 5 cm fără întindere.
- Aplicați întinderea în conformitate cu aplicatorul.
- ANCORAȚI ultimii 5 cm fără întindere.
- După aplicare, frecați banda pentru a obține cea mai bună aderență.

Se aplică după cum este necesar. Poate fi purtată până la 7 zile.

MODUL DE APLICARE A BENZII - MIJLOC

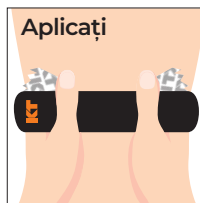


Aplicați așa cum se arată


- Aplicați întinderea în conformitate cu aplicatorul.
- ANCORAȚI mai întâi 5 cm fără întindere.
- ANCORAȚI ultimii 5 cm fără întindere.
- După aplicare, frecați banda pentru a obține cea mai bună aderență.

Citiți toate atenționările de pe cutie.

CUM SE ÎNDEPĂRTEAZĂ SUPTUL DE HÂRTIE - MIJLOC

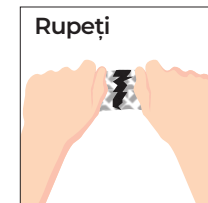


Răsuciți și trageți pentru a rupe hârtia în centru.

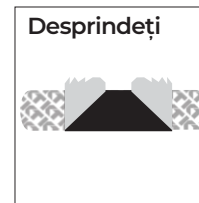

Desprindeți hârtia lăsând câte 5 cm de hârtie pe fiecare parte pentru manipulare.

3 CUM SE ÎNDEPĂRTEAZĂ BANDA

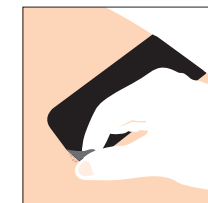

Începeți prin a desprinde banda în sus, de la un colț. Țineți cu o mână pielea în jos, în locul unde se îndepărtează banda, în timp ce trageți ușor de bandă cu cealaltă mână. Îndepărtați încet.

Consultați instrucțiunile pentru îndepărtarea benzii adezive puternice pe site-ul nostru web

NOVÁ POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

UPOZORNENIE: Nesprávna aplikácia, nadmerné nťahovanie alebo nanášanie na oblasti citlivej pokožky a nesprávne alebo rýchle odstraňovanie môže spôsobiť podráždenie pokožky, pluziere alebo odreniny. Neumiestňujte KT TAPE® priamo na rezné rany alebo otvorené rany. Jedna alebo viac zložiek tohto produktu je farbený materiál. Existuje možnosť, že počas používania môže dôjsť k určitej migrácii farby. Poskytnuté pokyny slúžia len na vzdialiacu účely. KT TAPE® nenahradza odbornú lekársku starostlivosť. Záruky a opravné prostriedky sú omedzené na cenu výmeny produktu.

TIPY NA NAJLEPŠIE VÝSLEDKY



APLIKOVAŤ PRED ČINNOSŤOU

Aplikujte pásku hodinu pred začiatkom činnosti pre najlepšiu príľnavosť.



STRIHAŤ VLASY

Zastrihnite nadmerné vlasy pre lepšiu príľnavosť.



ČISTÁ PLEŤ

Nečistoty, oleje a pleťové vody z miesta očistite liehom.



NEODTRHÁVAJTE NASILU!

Jemne odstráňte pásku z pokožky.



NEPREŤAHUJTE

Môže to mať za následok prílišné natiahnutie pásky podráždenie kože a/alebo odreniny.



SKONČITE NA KOŽI, NIE NA PÁSKE

Aplikujte podľa možnosti priamo na pokožku, najmä konce.

NÁVOD NA NAŤAHOVANIE A UKAZOVATEĽ



POZOR:

- Len na vonkajšie použitie
- Zabráňte kontaktu s očami
- Neaplikujte na rany alebo poškodenú pokožku
- Neobväzujte príliš pevne
- Uchovávajújte mimo dosahu detí
- Ak sa stav zhorší alebo ak symptómy pretrvávajú dlhšie ako 7 dní, prípadne vymiznú a znova sa objavia v priebehu niekoľkých dní, prerušte použitie tohto produktu a poraďte sa s lekárom

2 AKO APLIKOVAŤ PÁSKU - KONIEC




Aplikujte podľa obrázka

- KOTVA ako prvá 5 cm bez natiahnutia.
- Aplikujte natiahnutie podľa aplikácie.
- KOTVA ako posledná 5 cm bez natiahnutia.
- Po aplikácii pošuchajte pásku pre lepšiu príľnavosť.

Aplikujte podľa potreby. Dá sa nosiť až 7 dní.

1 AKO ODSTRÁNIŤ PAPIEROVÚ VÝPLŇ - KONIEC

Roztrhnúť

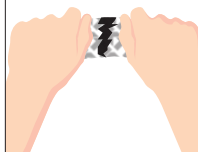

Otočte a potiahnite na roztrhnutie papier 5 cm od konca.

Odlepiť



Odstráňte 5 cm z papiera od konca.

AKO APLIKOVAŤ PÁSKU - STRED

Aplikovať




Aplikujte podľa obrázka

- Aplikujte natiahnutie podľa aplikácie.
- KOTVA ako prvá 5 cm bez natiahnutia.
- KOTVA ako posledná 5 cm bez natiahnutia.
- Po aplikácii pošuchajte pásku pre lepšiu príľnavosť.

Prečítajte si všetky upozornenia na krabici.

AKO ODSTRÁNIŤ PAPIEROVÚ VÝPLŇ - STRED

Roztrhnúť

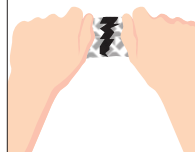

Otočte a potiahnite na roztrhnutie papier v strede.

Odlepiť



Odlepte papier 5 cm papiera na oboch stranách pre manipuláciu.

3 AKO ODSTRÁNIŤ PÁSKU



Začnite odlepením pásky v rohu. Jednou rukou držte kožu na mieste, kde sa páska stahuje, a druhou rukou pásku jemne stahujte. Odstraňujte pomaly.

Pozrite si pokyny na odstránenie silnej lepiacej pásky na našej webovej stránke

NOV UPORABNIŠKI PRIROČNIK

PREVIDNO Nepravilen nanos, šezmerno raztezanje ali nanos na občutljive dele kože ter nepravilno ali hitro odstranjevanje lahko povzročijo draženje kože, žulje ali odrgnine. Pripomoček KT TAPE® ne nameričate neposredno na ureznine ali odprte rane. Eden ali več delov tega izdelka je iz obarvanega materiala. Obstaja možnost, da med uporabo pride do prenosa barve. Priložena navodila so samo informativna. Pripomoček KT TAPE® ne nadomešča strokovne medicinske oskrbe. Jamstva in pravna sredstva so omejena na stroške zamenjave izdelka.

NASVETI ZA NAJBOLJŠE REZULTATE



PRIPOMOČEK NANESITE PRED DEJAVNOSTJO

Trak nanesite eno uro pred začetkom dejavnosti, da bi kar najbolje držal.



ODSTRANITE DLAKE

Za boljše lepljenje odstranite odvečne dlake.



KOŽO OČISTITE

Z alkoholom očistite umazanijo, olje in losjon s kožne površine.



NE ODRGAJTE!

Trak s kože odstranite nežno.



NE RAZTEZAJTE SE PREVEČ

Čezmerno raztegnjeni trak lahko povzroči draženje kože in/ali odrgnine.




KONCI MORAJO BITI NA KOŽI, NE NA TRAKU

Kadar je to mogoče, trak nanesite neposredno na kožo, zlasti za konce.

VODILO IN KAZALO ZA RAZTEZANJE



1 KAKO ODSTRANITI PAPIRNATO PODLOGO – KONČNI DEL

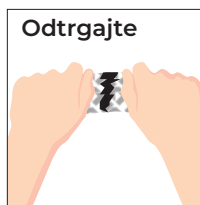


Odtrgajte
Zavrtite in povlecite, da papir odtrgate 5 cm od konca.




Odlepite ga
Papir odstranite 5 cm od konca.

KAKO ODSTRANITI PAPIRNATO PODLOGO – SREDNI DEL

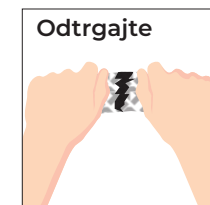


Odtrgajte
Zavrtite in povlecite, da papir odtrgate v sredini.

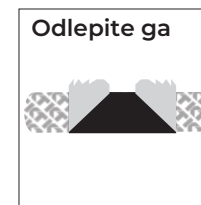

Odlepite ga
Odlepite papir in ga 5 cm pustite na obeh straneh za lažje rokovanje.

2 KAKO NALEPITI TRAK – KONČNI DEL

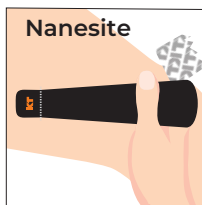

Nanesite
Nanesite, kot je prikazano.

- PRITRDITE prvih 5 cm brez raztezanja.
- Uporabite raztezanje v skladu z uporabo.
- PRITRDITE prvih 5 cm brez raztezanja.
- Po nanosu podrgnite po traku, da se čim boljše oprime.

Nanesite po potrebi. Lahko se nosi do 7 dni.

KAKO NALEPITI TRAK – SREDNI DEL




Nanesite
Nanesite, kot je prikazano.

- Uporabite raztezanje v skladu z uporabo.
- PRITRDITE prvih 5 cm brez raztezanja.
- PRITRDITE prvih 5 cm brez raztezanja.
- Po nanosu podrgnite po traku, da se čim boljše oprime.

Preberite vsa opozorila na škatli.

3 ODSTRANJEVANJE TRAKU

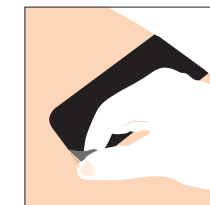

Najprej odlepite trak v kotu. Z eno roko držite kožo, kjer želite odstraniti trak, napeto, z drugo roko pa trak nežno povlecite. Počasi ga odstranite.

Oglejte si navodila za odstranjevanje močnega lepilnega traku na našem spletnem mestu.

PREVIDNOST:

- Samo za zunanjo uporabo
- Izogibajte se stiku z očmi
- Ne nanašajte na rane ali poškodovano kožo
- Ne povijajte tesno
- Hranite izven dosega otrok
- Če se stanje poslabša ali če simptomi trajajo več kot 7 dni ali izginejo in se znova pojavijo v nekaj dneh, prenehajte uporabljati ta izdelek in se posvetujte z zdravnikom

NY BRUKSANVISNING

OBSERVERA: Felaktig applicering, översträckning eller applicering på områden med känslig hud samt felaktig eller snabb borttagning kan leda till hudirritation, blåsor eller skavsår. Placera inte KT TAPE® direkt över skavsår eller öppna sår. En eller flera av komponenterna i denna produkt är ett färgat material. Det finns en risk för att viss färgmigration kan förekomma under användning. Instruktionerna är endast avsedda för utbildningsändamål. KT TAPE® är inte en ersättning för professionell medicinsk vård. Garantier och rättsanspråk begränsas till kostnaden för att ersätta produkten.

TIPS FÖR BÄSTA RESULTAT



APPLICERA FÖRE AKTIVITET

Applicera tejp en timme innan aktiviteten påbörjas för bästa vidhäftning.



RAKA BORT HÅR

Raka av överskott av hår för bästa vidhäftning.



RENGÖR HUDEN

Rengör området från smuts, oljor och hudkrämer med rengöringssprit.



RIV INTE AV!

Avlägsna försiktigt tejp från huden.



STRÄCK INTE FÖR MYCKET


Om tejp sträcks för mycket kan det leda till hudirritation och/eller skavsår.



ÄNDEN SKA VARA PÅ HUDEN, INTE PÅ TEJPEN

Applicera direkt på huden om möjligt, särskilt ändarna.

STRÄCKNINGSGUIDE OCH INDIKATOR

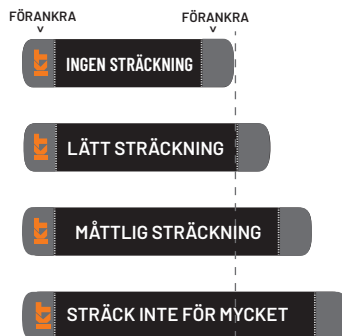


OBSERVERA:

- Endast för utvärtes bruk
- Undvik kontakt med ögonen
- Applicera inte på sår eller skadad hud
- Bandagera inte hårt
- Förvara utom räckhåll för barn
- Om tillståndet försämras eller om symtomen kvarstår i mer än 7 dagar eller försvinner och återkommer inom några dagar, sluta använda denna produkt och kontakta läkare

Applicera enligt anvisningen

Ansök vid behov. Kan bäras upp till 7 dagar.

1 SÅ AVLÄGSNAR DU PAPPERSBAKSIDAN - ÄNDEN

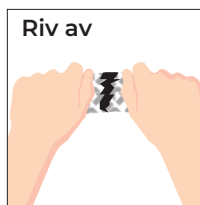

Riv av


Vrid och dra för att riva av papperet 5 cm från änden.



Dra av


Ta bort 5 cm av papperet från änden.

SÅ AVLÄGSNAR DU PAPPERSBAKSIDAN - MITTEN

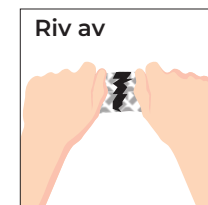

Riv av


Vrid och dra för att riva av papperet på mitten.

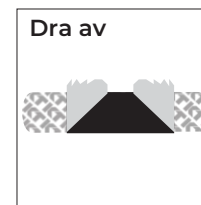

Dra av

Dra av papperet och lämna 5 cm papper på båda sidor för hantering.


2 SÅ APPLICERAR DU TEJPEN - ÄNDEN

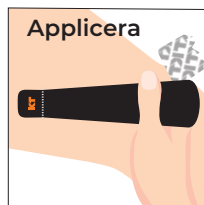

Applicera enligt anvisningen

- FÖRANKRA först 5 cm utan sträckning.
- Sträck i enlighet med applikationen.
- FÖRANKRA sista 5 cm utan sträckning.
- Gnugga tejp efter applicering för bästa vidhäftning.

SÅ APPLICERAR DU TEJPEN - MITTEN

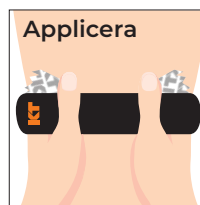


Applicera enligt anvisningen


- Sträck i enlighet med applikationen.
- FÖRANKRA först 5 cm utan sträckning.
- FÖRANKRA sista 5 cm utan sträckning.
- Gnugga tejp efter applicering för bästa vidhäftning.

Läs alla varningar på rutan.

3 SÅ AVLÄGSNAR DU TEJPEN

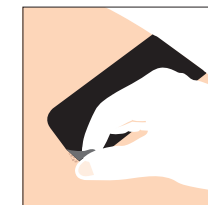

Börja med att dra upp tejp i ett av hörnen. Håll ner huden där tejp dras av med ena handen medan du försiktigt drar av tejp med den andra handen. Avlägsna långsamt.

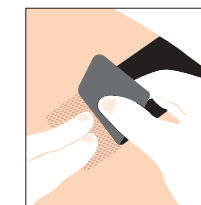

Se anvisningarna om borttagning av starkt vidhäftande tejp på vår webbplats

NY BRUKERVEILEDNING

FORSIKTIG: Feil påføring, for stram påføring eller påføring på områder med sensitiv hud, og feilaktig eller rask fjerning kan føre til hudirritasjon, blødder eller hudslitasje. Ikke plasser KT TAPE® direkte over kutt eller åpne sår. Produktet inneholder en eller flere komponenter av et farget materiale. Det er en mulighet at noen av fargestoffene kan smitte av under bruk. Instruksjonene er kun for pedagogisk bruk. KT TAPE® er ikke en erstatning for profesjonell medisinsk behandling. Garantier og kompensasjon er begrenset til produktets erstatningsverdi.

TIPS FOR BESTE RESULTATER



PÅFØR FØR AKTIVITET

Påfør tapen en time før du begynner aktiviteten for best feste.



TRIM HÅR

Fjern overflødig hår for bedre feste.



RENGJØR HUDEN

Rengjør smuss, olje og lotioner fra området med alkohol.



IKKE RIV AV!

Fjern tapen forsiktig fra huden.



IKKE PÅFØR TAPEN FOR STRAMT

Hvis du påfører tapen for stramt kan det føre til hudirritasjon og/eller skrubbsår.



END PÅ HUDEN, IKKE PÅ TAPEN

Påfør direkte på huden når det er mulig, spesielt endene.

GUIDE OG INDIKATOR FOR STREKKING




FORSIKTIG:

- Kun til utvortes bruk
- Unngå kontakt med øynene
- Må ikke brukes på sår eller skadet hud
- Må ikke strammes for hardt
- Oppbevares utilgjengelig for barn
- Hvis tilstanden forverres eller symptomene vedvarer i mer enn 7 dager, eller hvis symptomene forsvinner og kommer tilbake i løpet av noen få dager, må du avbryte bruken av dette produktet og oppsøke lege

Påfør ved behov. Kan brukes i opptil 7 dager.

1 HVORDAN FJERNER DU PAPIRBESKYTTELSEN - ENDEN

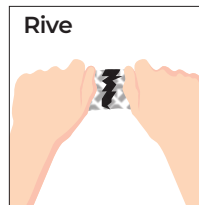

Rive


Vri og trekk for å fjerne papiret 5 cm fra enden



Dra av


Fjern 5 cm av papiret fra enden.

2 HVORDAN FJERNER DU PAPIRBESKYTTELSEN - I MIDTEN

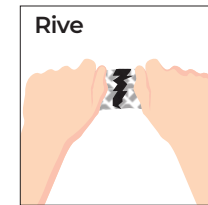

Rive


Vri og trekk for å fjerne papiret i midten.

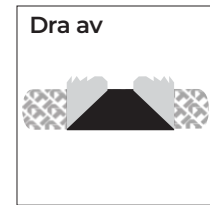


Dra av

Pell av papiret og behold 5 cm papir på begge endene for håndtering.

2 HVORDAN PÅFØRE TAPEN - ENDEN

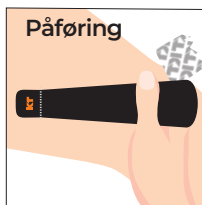

Påfør tapen som anvist.

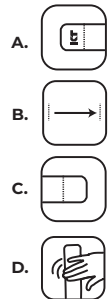


A. FEST først 5 cm av tapen uten å strekke den.

B. STREKK tapen i følge anvisningen


C. FEST de sist 5 cm uten å strekke tapen.

D. ETTER påføring, gni tapen slik at den sitter godt fast.

3 HVORDAN PÅFØRE TAPEN - I MIDTEN

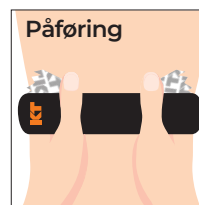

Påfør tapen som anvist.

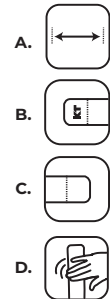

A. STREKK tapen i følge anvisningen


B. FEST først 5 cm av tapen uten å strekke den.

C. FEST de sist 5 cm uten å strekke tapen.


D. ETTER påføring, gni tapen slik at den sitter godt fast.

Les alle advarslene på boksen.

3 SLIK FJERNER DU TAPEN

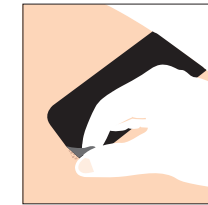

Begynn med å fjerne tapen i ett hjørne. Strekk huden i motsatt retning med den ene hånden i nærheten av tapen mens du forsiktig trekker tapen av med den andre hånden. Fjern sakte.

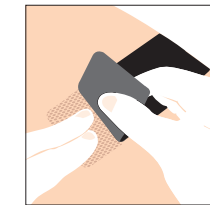

Se instruksjonen for fjerning av sterk tape på nettsiden vår.

НОВЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ СПРАВОЧНИК

ВНИМАНИЕ: Неправильное применение, чрезмерное растяжение, наложение на участки с чувствительной кожей, а также неправильное или быстрое удаление могут привести к раздражению кожи, образованию волдырей или потертостей. Не накладывайте KT TAPE® непосредственно на порезы или открытые раны. Один или несколько компонентов данного продукта являются окрашенными материалами. Существует вероятность того, что во время использования может произойти некоторая миграция цвета. Приведенные инструкции предназначены только для образовательного использования. KT TAPE® не является заменой профессиональной медицинской помощи. Гарантии и средства защиты ограничиваются стоимостью замены продукта.

СОВЕТЫ ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА



НАНЕСИТЕ ЛЕНТУ ДО НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ
Нанесите ленту за час до начала занятий для лучшей адгезии.



ПОДСТРИЧЬ ВОЛОСЫ
Подстригите лишние волосы для лучшего сцепления.



ЧИСТАЯ КОЖА
Очистите участок от грязи, масел и лосьонов с помощью протирания спиртом.



НЕ ОТРЫВАЙТЕ!
Аккуратно удалите ленту с кожи.



НЕ РАСТЯГИВАЙТЕ СЛИШКОМ СИЛЬНО
Чрезмерное растяжение ленты может привести к раздражению кожи и/или ссадинам.



НАНОСИТЬ НА КОЖУ, А НЕ НА ПЛЕНКУ
По возможности наносите непосредственно на кожу, особенно на концы.


НАПРАВЛЯЮЩАЯ И ИНДИКАТОР РАСТЯЖЕНИЯ



ВНИМАНИЕ:

- только для наружного применения
- Не допускайте контакта с глазами
- Не наносите на раны или поврежденные участки кожи
- Не накладывайте повязку слишком туго
- Храните в недоступном для детей месте
- В случае ухудшения симптомов или если симптомы сохраняются более 7 дней, или если симптомы проходят и вновь появляются через несколько дней, прекратите использование продукта и обратитесь за медицинской помощью

2 КАК НАНОСИТЬ ЛЕНТУ - КОНЕЦ

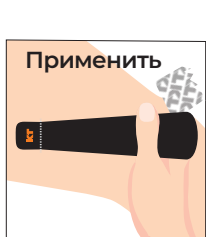


Нанесите, как показано на рисунке

- первый анкер 5 см без растяжения.
- Применяйте растяжку в соответствии с применением.
- длина анкерного крепления 5 см без растяжения.
- После нанесения потрите ленту для лучшего прилипания.

Применять по мере необходимости. Можно носить до 7 дней.

1 КАК УДАЛИТЬ БУМАЖНУЮ ПОДЛОЖКУ - КОНЕЦ

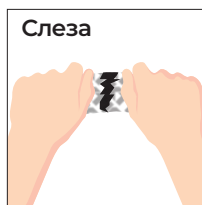

Слеза
Скручивайте и тяните, чтобы порвать бумагу на 5 см от конца.



Пилинг
Удалите 5 см бумаги с торца.

КАК НАКЛАДЫВАТЬ ЛЕНТУ - СРЕДНЯЯ




Нанесите, как показано на рисунке

- Применяйте растяжку в соответствии с применением.
- первый анкер 5 см без растяжения.
- длина анкерного крепления 5 см без растяжения.
- После нанесения потрите ленту для лучшего прилипания.

Прочтите все предупреждения на коробке.

КАК УДАЛИТЬ БУМАЖНУЮ ПОДЛОЖКУ - СРЕДНЯЯ

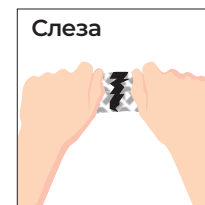


Слеза
Скрутите и потяните, чтобы разорвать бумагу в центре.



Пилинг
Очистите бумагу, оставив 5 см бумаги с обеих для обработки.

3 КАК УДАЛИТЬ ПЛЕНКУ

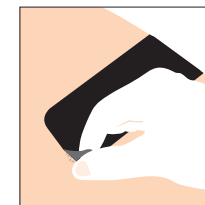

Начните отклеивать ленту с угла. Одной рукой придерживайте кожу в месте отрыва ленты, а другой осторожно отрывайте ее. Снимайте медленно.

Смотрите инструкции по удалению сильной клеевой ленты на нашем сайте

新用户指南

注意：贴涂不当、过度拉伸或贴涂在敏感皮肤区域，以及以不当或快速方式移除可能会导致皮肤刺激、水泡或皮肤磨损。不要将 KT TAPE® 直接贴涂在伤口或开放性伤口上。本产品的一种或多种成分是染色材料。在使用过程中可能会发生一些颜色迁移。提供的说明仅为教育目的。KT TAPE® 不能替代专业医疗护理。保障和补救措施仅限于产品更换成本。

獲得最佳結果的提示



活动前贴好胶带

在开始活动前，提前一小时贴胶带以获得最佳附着力



修剪毛发

修剪多余的毛发以获得更好的附着力



清洁皮肤

用外用酒精清洁该区域的污垢、油脂和润肤霜。



不要用力扯掉！

轻轻地从皮肤上取下胶带



不要过度紧张

过度拉伸胶带可能会导致皮肤刺激和（或）擦伤。




末端在皮肤上，而不是在胶带上

尽可能直接涂抹在皮肤上，特别是两端。


拉伸指南和指示器



1 如何去除背纸——尾部

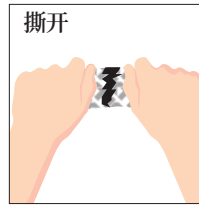


扭拉以撕开距末端 5 厘米的纸。

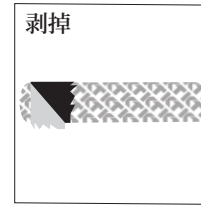


从头到尾剥掉 5 厘米的纸。

如何去除背纸——中间

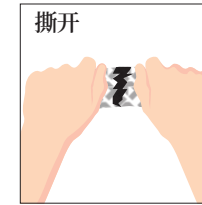


扭拉以撕开在中间的纸。

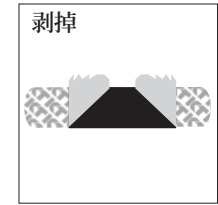


剥掉纸，在两侧留下 5 厘米的距离以供把持。

2 如何贴胶带——尾部

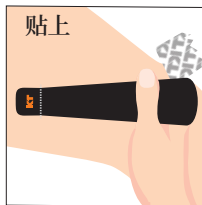


按如图所示的方法贴上

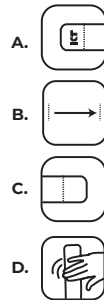


- 固定前面的 5 厘米，不要拉伸。
- 在贴上胶布时按需要进行拉伸
- 固定末尾的 5 厘米，不要拉伸。
- 贴好后，揉搓胶带以获得最佳附着力。

根據需要申請。最多可佩戴 7 天。

如何贴胶带——中间

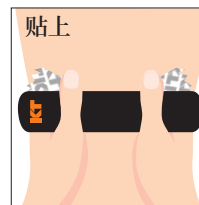


按如图所示的方法贴上

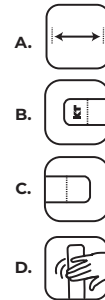


- 在贴上胶布时按需要进行拉伸
- 固定前面的 5 厘米，不要拉伸。
- 固定末尾的 5 厘米，不要拉伸。
- 贴好后，揉搓胶带以获得最佳附着力。

閱讀包裝盒上的所有注意事項。

3 如何去除胶带

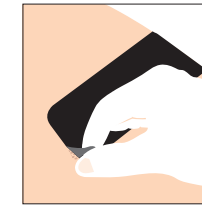

首先在一个角上剥开胶带。用一只手按住要移除胶带的皮肤，同时用另一只手轻轻拉胶带。慢慢剥出。

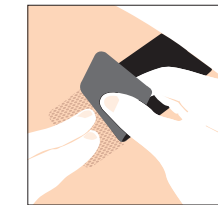

请参阅我们网站上关于去除强力胶带的说明

注意：

- 仅限外用
- 避免接触眼睛
- 请勿用于伤口或破损皮肤
- 请勿包扎过紧
- 请将置于儿童接触不到的地方
- 如果病情恶化，或症状持续超过 7 天，或消失后几天内再次出现，请停止使用本产品并咨询医生

新ユーザーガイド

警告：不適切な使用、過度な引き伸ばし、肌の敏感な部分への使用、不適切な取り除き方や急激な取り除き方は、皮膚炎、水膨れ、擦り傷の原因となる可能性があります。KT TAPE®を切り傷や治療していない傷口に直接貼らないでください。本製品のつまたは複数の成分は色素材料です。ご使用時に色移りする可能性があります。提供済みの案内は製品のご紹介のみを目的としています。KT TAPE®は専門医療に代わるものではありません。保証及び賠償は製品交換費用を上限とさせていただきます。

最良の結果を得るためのヒント



活動前に貼ってください
活動開始の1時間前にご使用いただく
と粘着が最高の状態になります。



体毛を整える
よく粘着させるために余分な毛を切ってください。



皮膚を清潔にする
拭き取り用アルコールで貼りつける箇所の汚れ、
油分、化粧水を取り除いてください。



急いで引き剥がさないでください！
テープは優しく取り除いてください。




引き伸ばしすぎない
テープを引き伸ばしすぎると
炎症や擦り傷の原因となる可能性があります。



端はテープではなく肌に貼る
可能な限り、特に両端は
肌に直接貼ってください。


引き伸ばし方のガイドと指標

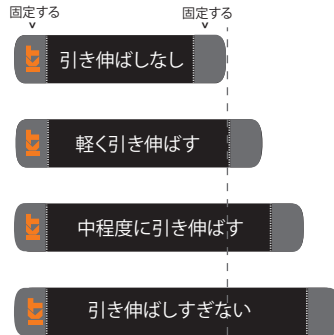

注意事項：


- 屋外でのみ使用してください
- 目に触れないように気を付けてください
- 傷の部分、または損傷した肌には使用しないでください
- 過度に強く巻かないでください
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 状態が悪化した場合、症状が1週間以上継続する場合、症状が消えた後、数日後に再発した場合は、本製品の使用を中止し、医師にご相談ください。

2 テープの貼り方 - 端

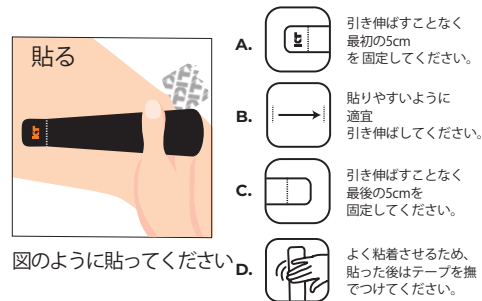


必要に応じて貼り付けてください。最大7日間まで装着可能です。

1 台紙の剥離方法 - 端

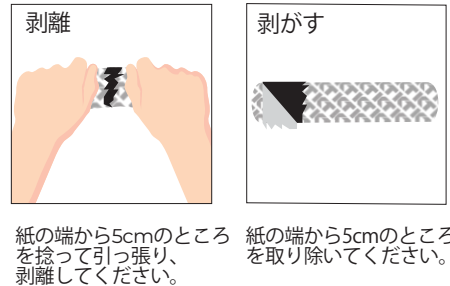


テープの貼り方 - 真ん中

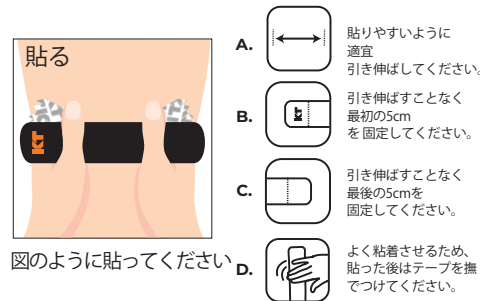


図のように貼り付けます。

台紙の剥離方法 - 真ん中

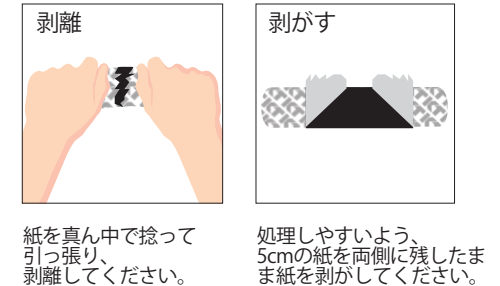

3 テープの取り除き方

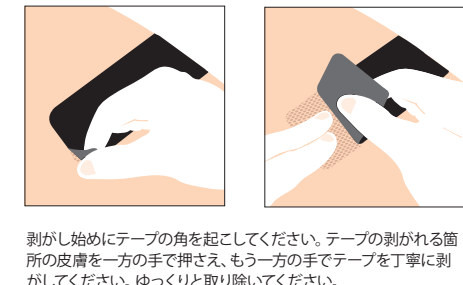

粘着力の強いテープの取り除き方につきましては、当社のウェブサイトにて案内をご確認ください。

신규 사용자 가이드

주의: 부적절하게 사용하거나, 과도하게 늘리거나, 민감한 피부 부위에 사용하거나, 부적절하게 또는 빠르게 제거할 경우 피부 자극, 통증, 상처를 유발할 수 있습니다. KT TAPE®를 베이거나 벌어진 상처 부위에 직접 부착하지 마세요. 본 제품의 구성품 중 하나 이상은 열색된 소재로 만들어졌습니다. 사용 중 이열이 발생할 수 있습니다. 제공된 지침은 교육 목적으로만 활용하세요. KT TAPE®는 전문적인 치료를 대체하지 않습니다. 보증 및 배상은 제품 교환 비용으로 제한됩니다.

최상의 결과를 위한 팁



활동 전에 부착
테이프가 잘 붙도록
활동하기 1시간 전에 부착하세요.



체모 정리
테이프가 잘 붙도록 과도한 체모를 정리하세요.



피부 세정
알코올로 부착 부위의 먼지, 오일, 로션 등을 닦으세요.



테이프를 한 번에 떼지 마세요!
부드럽게 떼어 내고




과도하게 늘리지 마세요
테이프를 과도하게 늘릴 경우
피부 자극 및/또는 손상을 유발할 수 있습니다.



테이프가 아닌 피부 위에 끝부분 부착
가능하면 피부에 직접,
특히 끝부분을 부착하세요.


신축성 가이드 및 지표

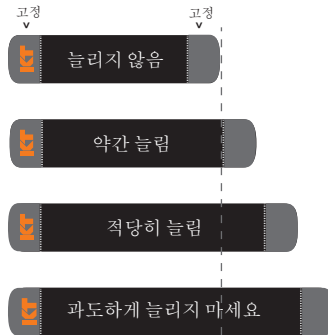

주의:


- 의용품입니다.
- 눈에 닿지 않도록 하십시오.
- 상처나 손상이 있는 피부에 사용하지 마십시오.
- 붕대를 꼭 감지 마십시오.
- 아이의 손에 닿지 않는 곳에 두십시오.
- 상태가 악화되거나 증상이 7일 넘게 지속되거나 증상이 사라졌다가 며칠 이내에 다시 발생하는 경우, 제품의 사용을 중단하고 의사와 상의하십시오.

2 테이프 부착 방법 - 끝

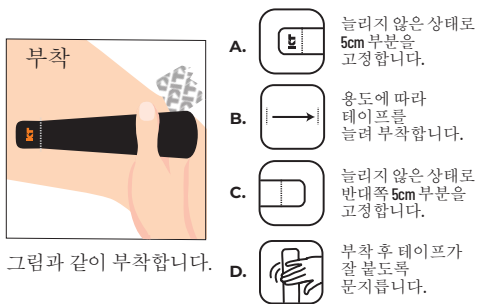


필요에 따라 신청하십시오. 7일까지 착용 가능합니다.

테이프 부착 방법 - 가운데

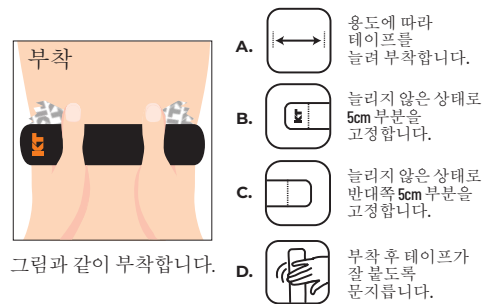


상자에 있는 모든 주의 사항을 읽으십시오.

후면 종이 제거 방법 - 가운데

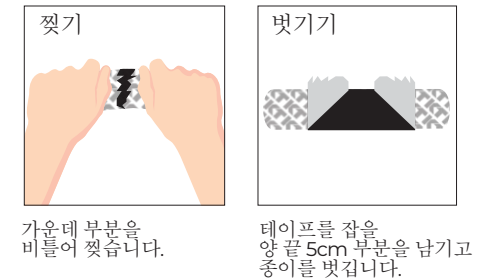

3 테이프 제거 방법

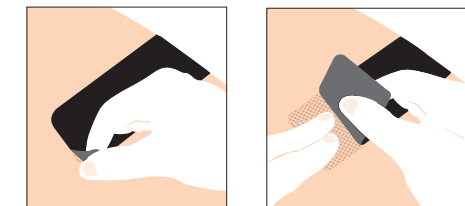

먼저 테이프의 모서리 부분을 벗깁니다. 한 손으로 피부를 누르면서 다른 손으로 테이프를 부드럽게 떼어 냅니다. 천천히 제거합니다.

강하게 부착된 테이프를 제거하는 방법은 웹사이트의 지침을 참고해 주세요.